



## » АКСЕСОАРИ ЗА ОПЕРАЦИОННИ МАСИ «



**Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH**

Сатлерстр. 11  
78532 Тутлинген  
Германия

SRN: DE-MF-000005822

Телефон: +49 (0) 7461 / 17 01 0

Поща: [mail@tekno-medical.com](mailto:mail@tekno-medical.com)

Уеб: [www.tekno-medical.com](http://www.tekno-medical.com)



## ИНХАЛТ

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| А Обхват на приложение .....                                     | 5  |
| Б Управление .....                                               | 5  |
| В Цел .....                                                      | 5  |
| Г Противопоказания .....                                         | 5  |
| Д Пациентска популация .....                                     | 5  |
| Е Целеви потребители .....                                       | 5  |
| Ж Бележки .....                                                  | 5  |
| Ж.А Екологични условия .....                                     | 5  |
| Ж.Б Комбинация с други устройства или медицински аксесоари ..... | 6  |
| Ж.В Разглобяване и модификации .....                             | 6  |
| 3 Ръчни настройки .....                                          | 6  |
| 3.А Таблата на леглото .....                                     | 6  |
| 3.А.А Регулиране на таблата (5 секции) .....                     | 6  |
| 3.А.Б Регулиране на таблата (6 секции) .....                     | 7  |
| 3.Б Облегалка .....                                              | 7  |
| 3.В Гръден отдел .....                                           | 7  |
| 3.Г Секция на краката .....                                      | 8  |
| 3.Г.А Поставяне на крак .....                                    | 8  |
| 3.Г.Б Корекция на секция на крака .....                          | 8  |
| 3.Г.В Отделяне на секция от крака .....                          | 9  |
| 3.Г.Г Разширителни сегменти на крака .....                       | 9  |
| 3.Д Секция на крака с 4 сегмента .....                           | 9  |
| 3.Е Подновявания .....                                           | 10 |
| 3.Е.А Разширение на главната страна (5 сегмента) .....           | 10 |
| 3.Е.Б Разширение на главната страна (6 сегмента) .....           | 10 |
| 3.Е.В Странично разгъване на краката .....                       | 11 |
| 3.Ж Тазова опора / облегалка за рамо .....                       | 11 |
| 3.З Коленичеща пейка .....                                       | 12 |
| 3.И Тазов сегмент .....                                          | 12 |
| 3.К Изисквания .....                                             | 12 |
| И Аксесоари за CF модели .....                                   | 12 |
| И.А Държач за плъзгащи се аксесоари .....                        | 12 |
| И.Б Стабилизационни щанги .....                                  | 12 |
| К Съхранение и транспорт .....                                   | 13 |
| К.А Съхранение .....                                             | 13 |
| К.Б Транспорт .....                                              | 13 |
| Л Утилизация .....                                               | 13 |
| М Използване с неоригинални аксесоари .....                      | 13 |
| Н Поддръжка, почистване и дезинфекция .....                      | 14 |
| Н.А Сегменти .....                                               | 14 |
| Н.Б Изисквания .....                                             | 14 |
| Н.В Transportwagen .....                                         | 14 |
| Н.В.А Почистване .....                                           | 14 |
| Н.В.Б Тестване и смазване .....                                  | 14 |
| О Съобщаване на проблеми с продукта .....                        | 14 |



## Инструкции за употреба – моля, прочетете преди употреба 4 / 16

|   |                        |    |
|---|------------------------|----|
| П | Гаранция .....         | 15 |
| Р | Сервиз и ремонт.....   | 15 |
| С | Символ.....            | 15 |
| Т | Списък с продукти..... | 16 |



## Инструкции за употреба – моля, прочетете преди употреба 5 / 16



Това ръководство трябва да се прочете внимателно преди използването на аксесоара, за да се запознаете с функциите му. Спазването на приложените мерки за безопасност гарантира високо качество на продуктите, лесна обработка и дълъг експлоатационен живот.

### A ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

---

Тези инструкции за употреба са валидни за следните продукти:



**Аксесоари за операционни маси.** (Вижте списъка с продукти в последния параграф.)

### Б УПРАВЛЕНИЕ

---

Продуктите могат да се използват само по предназначение в медицинските специалности от подходящо обучен и квалифициран персонал. Отговорността за избора на продукти за конкретни приложения, подходящо обучение и информация, както и достатъчен опит за боравене с продуктите, е на лекуващия лекар или потребител.

### В ЦЕЛ

---

Подкрепя на пациента в различните фази на операцията, като подготовка за операция, прилагане на анестезия, изпълнение на процедурата и събуждане на пациента от упойка след операцията.

### Г ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

---

По принцип не са идентифицирани противопоказания за използване на аксесоари за операционни маси.

### Д ПАЦИЕНТСКА ПОПУЛАЦИЯ

---

Използването на операционни маси и техните аксесоари е препоръчано за всички пациенти, които трябва да преминат през различни диагностични прегледи или операции в операционната.

### Е ЦЕЛЕВИ ПОТРЕБИТЕЛИ

---

Използването на операционните маси и техните аксесоари в реална употреба е запазено изключително за обучени специалисти.

Почистването и поддръжката могат да се извършват само от обучени специалисти.

### Ж БЕЛЕЖКИ

---

#### Ж.А Екологични условия

Операционната маса и аксесоарите трябва да се използват в операционна зала, която е достатъчно голяма, за да побере устройството и да позволи неговото движение.

Оперативната среда трябва също така да гарантира, че са изпълнени следните условия на труд:

- Температура от 10°C до 35°C
- Влажност от 30% до 70%

Операционната маса трябва да се използва в помещения с подходящ гладък и антистатичен под и с заземяващи връзки.



### Ж.Б Комбинация с други устройства или медицински аксесоари

Преди да използвате каквото и да е друго оборудване или аксесоари, внимателно прочетете ръководството за устройството или аксесоара и се уверете, че операционната маса и аксесоарите няма да бъдат подложени на негативни ефекти.

Преди да инсталирате аксесоари от външен доставчик, моля, свържете се с вашия дилър или нашата компания. Някои аксесоари не могат да се монтират!

Поради хигиенни съображения, непременно използвайте стерилизирани кърпички върху зоните на продукта, които влизат в контакт с пациента.

Ако използвате операционната маса, уверете се, че проверявате позициите на другото оборудване. По време на работа те могат да се докоснат и да бъдат повредени.

### Ж.В Разглобяване и модификации

Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате масата или аксесоарите, за да избегнете риск от повреда.

Не променяйте аксесоарите без разрешение от производителя. В случай на модификация на продукта трябва да се проведат подходящи изследвания и тестове, за да се гарантира продължаваща безопасна употреба.

## 3 РЪЧНИ НАСТРОЙКИ

Операционните таблици позволяват ръчни настройки за следните сегменти:


- Табла,
- Торакс,
- Облегалка,
- Разширяване на таза,
- Удължаване на лоста за коляно,
- Удължаване на облегалката,
- Сечения на краката.

### 3.А Таблата на леглото

Главната секция, предоставена с операционната маса, позволява отрицателна и положителна корекция, освен това е възможно да бъде премахната и заменена с други части от линията аксесоари (вижте каталога на аксесоарите).

#### 3.А.А Регулиране на таблата (5 секции)

За да коригирате и извадите таблата, направете следното:

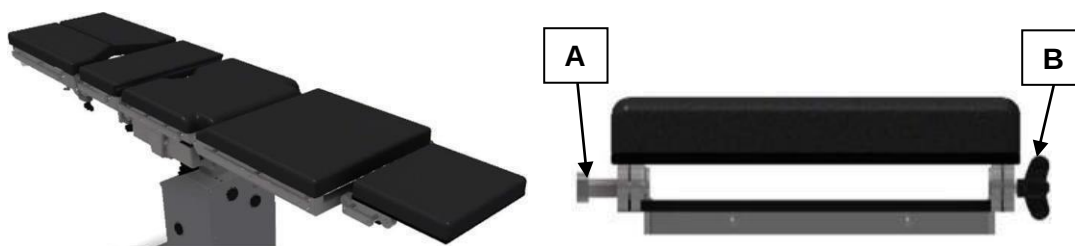

За да регулирате наклона, използвайте дръжка А и я завийте с винт. След като отворите дръжката, започнете да регулирате таблата на леглото и, когато достигнете позицията, затворете дръжката (преди да почивате на тежестта на пациента).

За да извадите таблата, използвайте двете дръжки (А и В), като ги развиете, но не напълно (могат да паднат). След като този процес приключи, издърпайте таблата навън. Сега можете да използвате масата без таблата или да поставите други табла. За да поставите другите табла, следвайте процедурите, описани по-долу, за да поставите таблата.



## Инструкции за употреба – моля, прочетете преди употреба 7 / 16

За да поставите таблата, уверете се, че дръжките А и В са в същото положение, както при изваждането.

Когато са затворени, отворете ги, като ги развиете (не напълно, защото могат да паднат). Поставете закрепванията на таблата в отворите на гърба, след което затворете дръжките до края.

### 3.А.Б Регулиране на таблата (6 секции)

За да коригирате и извадите таблата, направете следното:



За да регулирате наклона, използвайте дръжка А и я завийте с винт. След като отворите дръжката, започнете да регулирате таблата на леглото и, когато стигнете до позицията, затворете дръжката.

За да извадите таблата, използвайте двете дръжки (А и В), като ги развиете, но не напълно (могат да паднат). След като този процес приключи, издърпайте таблата навън. Сега можете да използвате масата без таблата или да поставите други табла. За да поставите другите табла, следвайте процедурите, описани по-долу, за да поставите таблата.

За да поставите таблата, уверете се, че дръжките А и В са в същото положение, както при изваждането.

Когато са затворени, отворете ги, като ги развиете (не напълно, защото могат да паднат). Поставете закрепванията на таблата в отворите на гърба, след което затворете дръжките до края.

### 3.Б Облегалка

Задната секция се регулира с дръжката в позиция (А). Вкарайте манивелата както е показано и я завъртете по часовниковата стрелка, за да повдигнете задната част. Завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да спуснете.



### 3.В Гръден отдел

Вкарайте манивелата в позиция (В) и я завъртете по часовниковата стрелка, за да повдигнете гръдния отсек. Въртенето обратно на часовниковата стрелка понижава гръдния отсек.





### 3.Г Секция на краката

Крачните секции, доставени с операционната маса, могат да се регулират ръчно. Могат да се доставят два вида модели – с две секции и с четири секции.

Секция на крака с четири сегмента



Секция на крака с два сегмента



И двете са регулируеми нагоре или надолу. Могат да се разпростират и изтеглят под 90°.

#### 3.Г.А Поставяне на крак

След като проверите дали винтът на крилото е развит, вкарайте крака в отделението за винтове, като държат крака наклонена



Дръж краката наклонена и вмъкни връзката на крака в съединителя на плота.



Позиционирайте секцията за крака както желаете (продължете да я поддържате).



След като проверите правилното поставяне в водача, затегнете винта на крилото (сега можете да освободите частта на крака).



#### 3.Г.Б Корекция на секция на крака

За да регулирате наклона на крака с 4 сегмента, просто използвайте лоста. Чрез натискане вътрешният механизъм повдига или спуска секцията в зависимост от това дали е избутната надолу или нагоре. За да заключите позицията след достигане на желаната височина, просто освободите лоста.



За да разтворите крачните секции, развийте дръжката и отворете крака с максимум 90°, преди да извършите други операции, затегнете дръжката напълно.





## Инструкции за употреба – моля, прочетете преди употреба 9 / 16

### 3.Г.В Отделяне на секция от крака

Разхлабете винта на крилото с едната ръка и поддържайте крака с другата.



След като проверите дали винтът на крилото е завинтен, наклонете крачната част.



Като държите краката наклонена, изтеглете крачната част от отделението за конектор.



### 3.Г.ГРазширителни сегменти на крака

Отворете ключалката, като завъртите дръжката обратно на часовниковата стрелка.




Поддържайте крачната част с едната ръка, дръжте здраво страничната дръжка и разтворете краката от другия край с другата ръка.

Поддържайте най-отдалечения край от дръжката с една ръка и отворете крачната секция навън с максимален ъгъл от 90° с помощта на дръжката.



### 3.Д Секция на крака с 4 сегмента

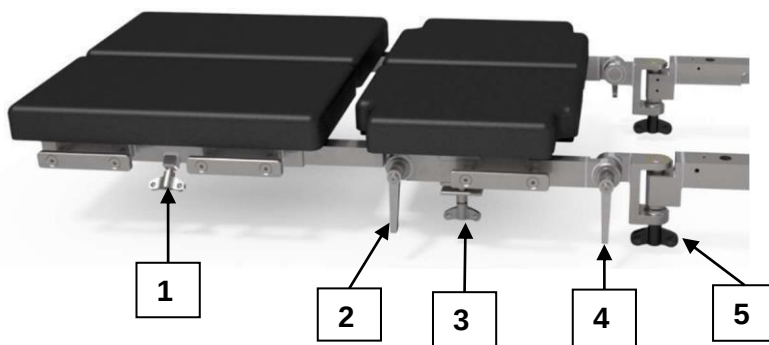



## Инструкции за употреба – моля, прочетете преди употреба 10 / 16

За да наклоните секцията на крака нагоре или надолу, просто използвайте лоста (4) и винта за палеца (3):

- Разхлабете винта на крилото и задръжте крака
- Преместете лоста в позиция "отворено"

Зъбният механизъм се отваря и можете да изберете желаната позиция. За да заключите частта с крака в тази позиция, просто натиснете лоста (4) отново и го затегнете напълно.

За да наклоните долната и горната част на крака с  $90^\circ$  (височина на коляното), трябва да отворите лоста (2). Този път се отваря и зъбният механизъм, върху който може да се накланя частта на крака, и можете да регулирате този наклон. Сечението може да бъде наклонено под  $90^\circ$  както положително, така и отрицателно.



За да разтворите крачката, разхлабете бутона (5). След като намерите подходящата позиция, затворете бутон 5, докато не видите, че зъбите на зъбния механизъм се заключват.

### 3.Е Подновявания

#### 3.Е.А Разширение на главната страна (5 сегмента)

За да поставите удължителя, уверете се, че винтовете на крилото са на същото място, в което са били оставени по време на изваждането. Когато са затворени, отворете ги, като ги развиете (не до края, защото могат да паднат).

Поставете водачите на удължителя в отворите на задната част и след това затворете винтовете на крилото напълно.



За да извадите удължителя, използвайте двата винта на крилото, като ги разхлабите, но не напълно (могат да паднат). След като този процес приключи, издърпайте секцията навън. Сега можеш да използваш таблицата без разширение или да вмъкнеш други секции.

#### 3.Е.Б Разширение на главната страна (6 сегмента)

За да поставите удължителя, уверете се, че винтовете на крилото са на същото място, в което са били оставени по време на изваждането. Когато са затворени, отворете ги, като ги развиете (не до края, защото могат да паднат). Поставете водачите на удължителя в отворите на задната част и след това затворете винтовете на крилото напълно.



За да извадите удължителя, използвайте двата винта на крилото, като ги разхлабите, но не напълно (могат да паднат). След като този процес приключи, издърпайте секцията навън. Сега можеш да използваш таблицата без разширение или да вмъкнеш други секции.



## 3.Е.В Странично разгъване на краката

За да вкарате удължението, действайте по следния начин: Вкарайте удължението, като поставите заключалките в подходящите водачи. След като проверите дали заключващите механизми са поставени правилно, затегнете винтовите копчета.




## 3.Ж Тазова опора / облегалка за рамо

Преди да продължите с поставянето на тези сегменти, уверете се, че всички части на крака са премахнати. Поставете закопчалките на тазовата опора или облегалката в подходящите водачи.

След като проверите, че закопчалките са поставени правилно, затегнете копчетата.

За да премахнете сегмента, развийте бутоните, наклонете сегмента нагоре и го извадете от съответния водач.

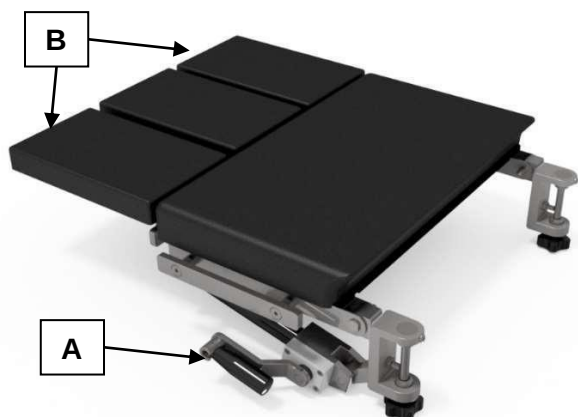

За да регулирате шарнирната облегалка за рамо, използвайте манивела (А) по следния начин:

- наклони нагоре, завърти обратно на часовниковата стрелка,
- Наклонете надолу, завъртете по часовниковата стрелка.

Можете да премахнете двете странични опорни секции (В) на облегалката по следния начин:

- Разхлабете дръжката, като я завъртите по часовниковата стрелка и плъзнете опората, която искате да премахнете, по водача (С), за да я извадите навън

За да върнете двете секции, продължете в обратен ред:

- Плъзнете секцията по водача и след това я заключете на място, като завъртите дръжката обратно на часовниковата стрелка.

Можете да добавите секции за подглавника над облегалката по следния начин:

- Поставете подглавника (А) близо до водача (С) и го закрепете към облегалката с винта на крилото.




### 3.3 Коленичеща пейка

За да поставите коленичещата пейка, направете следното: Поставете я като я поставите в подходящия насочвач. След като проверите дали лежанката за колене е поставена правилно, затегнете копчето (B).

За да премахнете коленичилата пейка, разхлабете копчето (B), наклонете частта нагоре и я извадете от водача.

За да регулирате лежанката на колене, използвайте манивела (A):

- за повдигане, завъртане обратно на часовниковата стрелка,
- завърти по часовниковата стрелка, за да свалиш.

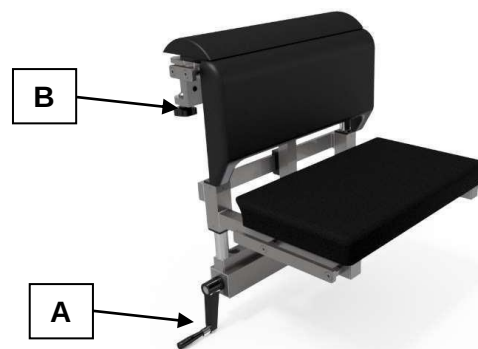

### 3.И Тазов сегмент

За да поставите сегмента на чинела, плъзнете го в подходящите водачи (A), разположени под плота.

### 3.К Изисквания

Препоръчва се да се сменят подложките редовно:

- на всеки 5 години за наслагвания от ПОЛИУРЕТАН
- На всеки 10 години, за топери от MEMORY FOAM

Независимо от вида на материала, трябва незабавно да замените накладките при износване или повреда.



## И АКСЕСОАРИ ЗА CF МОДЕЛИ

### И.А Държач за плъзгащи се аксесоари

Преди да продължите с поставянето/премахването на държача за аксесоари, направете самонивелиране на масата (LEVEL).



За да поставите държача, разхлабете бутоните без да ги сваляте, след това поставете държача в страничните удължения на горната част и го плъзнете в желаната позиция.

За да премахнете държача, разхлабете бутоните без да ги сваляте, след което плъзнете държача по удължителите, докато не бъде свален.

Независимо дали бутоните са максимално стегнати или не, държачът е изграден така, че да следва самото движение по време на надлъжни транслационни отклонения на плочата и да се плъзга интегрално с плочата без блокиране.

### И.Б Стабилизационни щанги

За да вкарате прътвата, развийте копчетата без да ги сваляте, след което ги плъзнете по предния водил на операционната маса. Когато достигнете желаната позиция, завийте копчетата обратно.

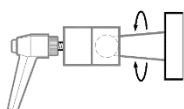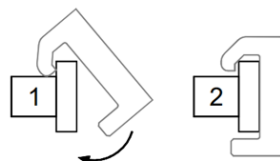

За да регулирате височината на пръта, настройте колянвия колян.

За да премахнете пръта, развийте копчетата без да ги махнете напълно, след което плъзнете по водача, докато не бъде свалена.

Препоръчително е да се вкара щангата преди изпълнение на следните движения: надлъжно преместване, максимално отклонение.




Отклонение на масата (дължина) не повече от 1100 мм без предпазен прът!



Винаги поставяйте предпазните пръти преди странично накланяне, за да намалите риска от преобръщане! Разхлабете предпазните пръти, когато активирате движенията за повдигане/спускане.

Премахнете прътите при Тренделенбург / обратен Тренделенбург, странично накланяне (надясно/ляво) и при нулиране (нивелиране). Това предотвратява съпротивата на предпазните пръти, което може да повреди масата.

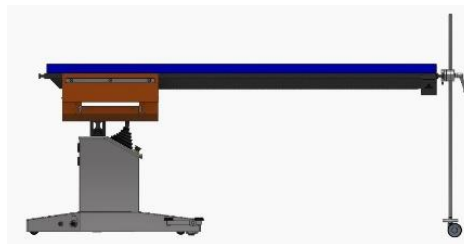

## К СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

### К.А Съхранение

Ако операционната маса трябва да се съхранява, тя трябва да бъде върната обратно в оригиналната си опаковка заедно с аксесоарите и подредени точно както е предоставена от производителя. Опаковката предпазва устройството от нормални удари и вибрации, които могат да възникнат по време на транспортиране.

Също така, спазвайте следните условия за съхранение:

- Температура: -5 °C / +35 °C;
- Влажност: <50%;
- Чиста, без прах среда.

### К.Б Транспорт

Масата и нейните аксесоари трябва да бъдат транспортирани в оригиналната си опаковка. Опаковката предпазва устройството от нормални удари и вибрации, които могат да възникнат по време на транспортиране.

Транспортната опаковка не е водоустойчива!

## Л УТИЛИЗАЦИЯ

В края на живота си медицинското устройство трябва да бъде изхвърлено от упълномощена компания в съответствие с приложимото законодателство, специфично за страната.

## М ИЗПОЛЗВАНЕ С НЕОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ

Операционните маси могат да се използват с аксесоари от други производители, тъй като водачите (интерфейсите) са стандартизирани. В този случай, за да се осигури безопасна и коректна работа, е необходимо да се провери максималният капацитет (товароносимост) на съответните сегменти, като се взема предвид както теглото на пациента, така и сглобените аксесоари.



## Н ПОДДРЪЖКА, ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

---

Важно е винаги да изключвате масата от захранването, като извадите щепсела преди извършване на поддръжка или почистване.

Забранено е използването на абразивни почистващи препарати и дезинфектанти. Детергентите с хлор, хлорид и оцетна киселина също са забранени.

### Н.А Сегменти

Грижата за сегментите е ограничена до редовно почистване с подходящи вещества. Следните почистващи агенти са одобрени за компоненти от неръждаема стомана: всички търговски налични почистващи препарати от неръждаема стомана. Следните почистващи агенти са одобрени за пластмасови компоненти: всички леко алкални почистващи средства. Всички налични дезинфектанти на пазара могат да се използват, при условие че отговарят на специфичните изисквания (с маркировка CE).

### Н.Б Изисквания

Подложките са напълно сваляеми, за да почистят сегментите дори отдолу. Освен това, извършваните обработки по повърхностите правят почистването и дезинфекцията на наслегите по-ефективни.

Преди да започнете почистване, премахнете подложките от сегментите, за да избегнете натрупване на материал и остатъчна мръсотия между горната част на сегментите и накладките.

Следните почистващи агенти са разрешени за подложките: всички почистващи препарати с ниска алкална стойност.

Всички налични дезинфектанти на пазара могат да се използват, при условие че отговарят на специфичните изисквания (с маркировка CE).

### Н.В Transportwagen

Грижата за транспортните колички е ограничена до почистване след края на обслужването и редовна инспекция и смазване на движещите се части.

#### Н.В.А Почистване

Следните почистващи агенти са одобрени за компоненти от неръждаема стомана: всички търговски налични почистващи препарати от неръждаема стомана.

Следните почистващи агенти са одобрени за пластмасови компоненти: всички леко алкални почистващи средства.

Всички налични дезинфектанти на пазара могат да се използват, при условие че отговарят на специфичните изисквания (с маркировка CE).

#### Н.В.Б Тестване и смазване

- Редовно проверявайте джантите за износване и ги сменяйте при нужда.
- Редовно проверявайте винтовите връзки за плътност.
- Смазвайте всички движещи се и механични части редовно.

## О СЪОБЩАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ С ПРОДУКТА

---



В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/745 относно медицинските изделия и нашата система за управление на качеството, всички проблеми с продукта трябва да бъдат докладвани на производителя.

По време на работно време можете да се свържете с нас по телефона на +49 (0) 07461/1701-0.

Извън редовното работно време, моля, изпратете имейл на [safety@tekno-medical.com](mailto:safety@tekno-medical.com).

Сериозните инциденти трябва да бъдат докладвани и на местния орган, отговорен за тяхното местоположение.



## Инструкции за употреба – моля, прочетете преди употреба 15 / 16

### П ГАРАНЦИЯ

Продуктите са произведени от висококачествени материали и преминават през контрол на качеството преди доставка. В случай на дефекти, моля, свържете се с нашия сервизен отдел. Tekno-Medical не може да гарантира, че продуктите са подходящи за конкретна процедура. Това трябва да се определи от потребителя. Tekno-Medical не носи отговорност за случайни или последващи щети.

Tekno-Medical не носи отговорност, ако може да се докаже, че тези инструкции за употреба са били нарушени.

### Р СЕРВИЗ И РЕМОНТ

Не се опитвайте сами да извършвате ремонти или модификации на продукта. Това е отговорност единствено на оторизиран персонал на производителя. Дефектните продукти трябва да преминат през целия процес на ремонт, преди да бъдат върнати за ремонт. За връщане, моля, използвайте нашия формуляр за RMA и сертификат за обеззаразяване. Можете да намерите формулярите на нашата начална страница: <https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>

### С СИМВОЛ

Символите, използвани в тази инструкция и на етикета, имат следното значение съгласно DIN EN ISO 15223-1:

| Символ | Описание                           | Символ | Описание                           |
|--------|------------------------------------|--------|------------------------------------|
|        | Внимание!                          |        | Производител                       |
|        | Медицинско устройство              |        | Дата на производство               |
|        | Унстерил                           |        | Следвайте инструкциите за употреба |
|        | Каталожен номер                    |        | Защитете от слънчева светлина      |
|        | Обозначение на партидата           |        | Съхранявайте на сухо място         |
|        | Уникална идентификация на продукта |        | CE марка                           |



## T СПИСЪК С ПРОДУКТИ

Стенда: 23.10.2024

|          |           |          |          |           |          |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| 300-1000 | 300-6020  | 301-2010 | 302-2040 | 305-0100  | 306-8000 |
| 300-1010 | 300-6030  | 301-2011 | 302-3000 | 305-0110* | 306-9010 |
| 300-1020 | 300-6040  | 301-2020 | 302-4000 | 305-0130  | 306-9020 |
| 300-1030 | 300-6050  | 301-2021 | 302-5000 | 305-0200  | 307-1000 |
| 300-1040 | 300-6160  | 301-2030 | 302-8000 | 305-0220  | 307-1010 |
| 300-1050 | 300-6190  | 301-2040 | 302-9000 | 305-0260  | 307-1020 |
| 300-1060 | 300-7000  | 301-2041 | 302-9001 | 305-0300  | 307-6000 |
| 300-1070 | 300-8000  | 301-2050 | 302-9021 | 305-0400  | 307-8002 |
| 300-1110 | 300-8010  | 301-2060 | 302-9190 | 305-0500  | 307-8003 |
| 300-1120 | 300-8020  | 301-2070 | 303-0000 | 305-0830  | 308-0000 |
| 300-1130 | 300-8040  | 301-2080 | 303-0010 | 305-1200  | 308-3000 |
| 300-1160 | 300-8050  | 301-2090 | 303-0020 | 305-1300  | 308-3010 |
| 300-1170 | 300-9000  | 301-2100 | 303-0040 | 305-1410  | 308-4000 |
| 300-1180 | 301-0001  | 301-2200 | 303-1000 | 305-1420  | 308-4010 |
| 300-1330 | 301-0002  | 301-3050 | 303-2000 | 305-1600  | 308-5000 |
| 300-2000 | 301-0010  | 301-5000 | 303-3000 | 305-1610  | 309-0000 |
| 300-2010 | 301-0030  | 301-5011 | 303-3010 | 305-1710  | 309-1000 |
| 300-2020 | 301-0040  | 301-5020 | 303-3070 | 305-1720  | 309-2000 |
| 300-2030 | 301-0050  | 301-5030 | 303-3080 | 305-2000  | 309-2010 |
| 300-2050 | 301-0101  | 301-6000 | 303-3140 | 305-2010  | 309-2020 |
| 300-2070 | 301-0200  | 301-6010 | 303-3220 | 305-2100  | 309-2030 |
| 300-2120 | 301-0202* | 301-6020 | 303-5000 | 305-2300  | 309-2040 |
| 300-2180 | 301-0210  | 301-6030 | 303-8000 | 305-2400  | 309-3000 |
| 300-2190 | 301-0300  | 301-6050 | 303-9010 | 305-2600  | 309-3020 |
| 300-2191 | 301-0320* | 301-8000 | 303-9020 | 305-3000  | 309-4000 |
| 300-3000 | 301-0325  | 301-8160 | 304-0020 | 305-3001  | 309-4040 |
| 300-4010 | 301-0330  | 302-0000 | 304-3000 | 305-3100  | 309-4193 |
| 300-5010 | 301-0335  | 302-2001 | 304-4000 | 306-1000  | 309-4210 |
| 300-5130 | 301-0401  | 302-2010 | 304-9000 | 306-1010  | 309-4211 |
| 300-5190 | 301-1020  | 302-2020 | 305-0000 | 306-2000  | 309-4419 |
| 300-6010 | 301-2000  | 302-2030 | 305-0010 | 306-7010  | 309-6010 |