



» DODACI ZA OPERACIJSKE STOLOVE «



Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH

Sattlerstr. 11
78532 Tuttlingen
Njemačka

SRN: DE-MF-000005822

Telefon: +49 (0) 7461 / 17 01 0

Pošta: mail@tekno-medical.com

Web: www.tekno-medical.com



UDAHNI

1	Opseg primjene	5
2	Upravljanje	5
3	Svrha	5
4	Kontraindikacije	5
5	Populacija pacijenata	5
6	Namijenjeni korisnici	5
7	Izlaganje	5
7.1	Uvjeti okoliša	5
7.2	Kombinacija s drugim uređajima ili medicinskim dodacima	6
7.3	Rastavljanje i modifikacije	6
8	Ručna podešavanja	6
8.1	Uzglavlje	6
8.1.1	Podešavanje uzglavlja (5 sekcija)	6
8.1.2	Podešavanje uzglavlja (6 sekcija)	7
8.2	Naslon za leđa	7
8.3	Torakalni rez	7
8.4	Sekcija nogu	8
8.4.1	Umetanje dijela noge	8
8.4.2	Podešavanje dijela noge	8
8.4.3	Odvajanje dijela noge	9
8.4.4	Segmenti nogu koji se šire	9
8.5	Sekcija nogu s 4 segmenta	9
8.6	Obnove	10
8.6.1	Produžetak glave (5 segmenata)	10
8.6.2	Produžetak stranice glave (6 segmenata)	10
8.6.3	Bočno produženje nogu	11
8.7	Potporna zdjelice / naslon za rame	11
8.8	Klupa za klečanje	12
8.9	Segment zdjelice	12
8.10	Zahtjevi	12
9	Dodaci za CF modele	12
9.1	Klizni držač pribora	12
9.2	Stabilizacijske šipke	12
10	Skladištenje i transport	13
10.1	Pohrana	13
10.2	Promet	13
11	Zbrinjavanje	13
12	Upotreba s neoriginalnim dodacima	13
13	Održavanje, čišćenje i dezinfekcija	14
13.1	Segmenti	14
13.2	Zahtjevi	14
13.3	Transportna kolica	14
13.3.1	Čišćenje	14
13.3.2	Testiranje i podmazivanje	14
14	Prijavljivanje problema s proizvodom	14
15	Jamstvo	14
16	Servis i popravak	15
17	Simbol	15



18 Popis proizvoda	16
--------------------------	----



Ovaj priručnik treba pažljivo pročitati prije korištenja dodatka kako biste se upoznali s njegovim funkcijama. Usklađenost s važećim sigurnosnim propisima jamči visoku kvalitetu proizvoda, jednostavno rukovanje i dug vijek trajanja.

1 OPSEG PRIMJENE

Ove upute za uporabu vrijede za sljedeće proizvode:



- **Dodaci za operacijske stolove.** (Pogledajte popis proizvoda u posljednjem odlomku.)

2 UPRAVLJANJE

Proizvodi se smiju koristiti samo za namjenu u medicinskim specijalnostima od strane odgovarajuće obučenog i kvalificiranog osoblja. Odgovornost za odabir proizvoda za specifične primjene, odgovarajuću obuku i informacije te dovoljno iskustva za rukovanje proizvodima leži na liječniku ili korisniku.

3 SVRHA

Podrška pacijentu u različitim fazama operacije, kao što su priprema za operaciju, primjena anestezije, izvođenje zahvata i buđenje pacijenta iz anestezije nakon operacije.

4 KONTRAINDIKACIJE

U načelu, nisu identificirane kontraindikacije za korištenje pribora za operacijske stolove.

5 POPULACIJA PACIJENATA

Korištenje operacijskih stolova i njihovih dodataka preporučuje se za sve pacijente koji moraju proći različite dijagnostičke preglede ili operacije u operacijskoj sali.

6 NAMIJENJENI KORISNICI

Korištenje operacijskih stolova i njihovih dodataka u stvarnoj upotrebi rezervirano je isključivo za obučene stručnjake.

Čišćenje i održavanje također smiju obavljati samo obučeni stručnjaci.

7 IZLAGANJE

7.1 Uvjeti okoliša

Operacijski stol i pribor moraju se koristiti u operacijskoj sali dovoljno velikoj da primi uređaj i omogući njegovo kretanje.

Operativno okruženje također mora osigurati da su ispunjeni sljedeći radni uvjeti:

- Temperatura od 10°C do 35°C
- Vlažnost od 30% do 70%

Operacijski stol treba koristiti u prostorijama s prikladnim glatkim i antistatičkim podom te s uzemljenjem.



7.2 Kombinacija s drugim uređajima ili medicinskim dodacima

Prije korištenja bilo koje druge opreme ili dodatka, pažljivo pročitajte upute za upotrebu uređaja ili dodatka i uvjerite se da operacijski stol i njegovi dodaci neće biti izloženi negativnim posljedicama.

Prije instalacije dodataka od treće strane, molimo kontaktirajte svog zastupnika ili našu tvrtku. Neki dodaci se ne mogu montirati!

Iz higijenskih razloga, obavezno koristite sterilizirane maramice na dijelovima proizvoda koji dolaze u kontakt s pacijentom.

Ako koristite operacijski stol, obavezno provjerite položaje ostale opreme. Tijekom rada mogu se dodirivati i oštetiti.

7.3 Rastavljanje i modifikacije

Nemojte pokušavati rastaviti ili mijenjati stol ili dodatke kako biste izbjegli rizik od kvara.

Nemojte mijenjati dodatke bez dopuštenja proizvođača. U slučaju modifikacije proizvoda, moraju se provesti odgovarajuće istrage i testovi kako bi se osigurala nastavak sigurne uporabe.

8 RUČNA PODEŠAVANJA

Operacijski stolovi omogućuju ručno podešavanje za sljedeće segmente:


- Uzglavlje,
- Thorax,
- Naslon za leđa,
- Ekstenzija zdjelice,
- Produženje poluge za koljeno,
- Produžetak naslona,
- Dijelovi nogu.

8.1 Uzglavlje

Dio glave koji dolazi s operacijskim stolom omogućuje negativno i pozitivno podešavanje, a uz to ga je moguće ukloniti i zamijeniti drugim dijelovima glave iz linije dodataka (vidi katalog dodatne opreme).

8.1.1 Podešavanje uzglavlja (5 sekcija)

Za podešavanje i izvlačenje uzglavlja, učinite sljedeće:

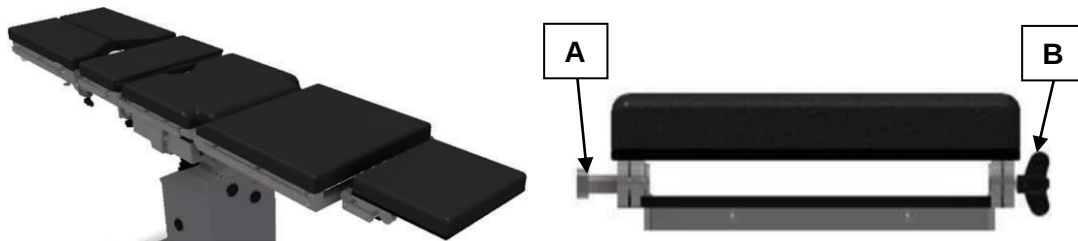

Za podešavanje nagiba koristi ručku A i zavrni je. Nakon što otvorite ručku, nastavite s podešavanjem uzglavlja i, kad dođete do položaja, zatvorite ručku (prije nego što odmorite težinu pacijenta).

Za izvlačenje uzglavlja koristi dvije ručke (A i B) tako da ih odvrneš, ali ne potpuno (mogu otpasti). Nakon što je ovaj postupak gotov, povucite uzglavlje prema van. Sada možete koristiti stol bez uzglavlja ili umetnuti druge uzglavlja. Za umetanje ostalih uzglavlja, slijedite postupke navedene u nastavku za umećanje uzglavlja.



Za umetanje uzglavlja, provjerite jesu li ručke A i B u istom položaju kao i prilikom vađenja. Kad su zatvoreni, otvorite ih odvijanjem (ne potpuno, jer mogu ispasti). Umetnite fiksacije uzglavlja u rupe na stražnjoj strani, zatim zatvorite ručke do kraja.

8.1.2 Podešavanje uzglavlja (6 sekcija)

Za podešavanje i izvlačenje uzglavlja, učinite sljedeće:



Za podešavanje nagiba koristi ručku A i zavrni je. Nakon što otvorite ručku, nastavite s podešavanjem uzglavlja, a kad dođete do položaja, zatvorite ručku.

Za izvlačenje uzglavlja koristi dvije ručke (A i B) tako da ih odvrneš, ali ne potpuno (mogu otpasti). Nakon što je ovaj postupak gotov, povucite uzglavlje prema van. Sada možete koristiti stol bez uzglavlja ili umetnuti druge uzglavlja. Za umetanje ostalih uzglavlja, slijedite postupke navedene u nastavku za umetanje uzglavlja.

Za umetanje uzglavlja, provjerite jesu li ručke A i B u istom položaju kao i prilikom vađenja.


Kad su zatvoreni, otvorite ih odvijanjem (ne potpuno, jer mogu ispasti). Umetnite fiksacije uzglavlja u rupe na stražnjoj strani, zatim zatvorite ručke do kraja.

8.2 Naslon za leđa

Stražnji dio se podešava s ručicom u položaju (A).

Umetnite radilicu kao što je prikazano i okrenite je u smjeru kazaljke na satu kako biste podigli stražnji dio.

Rotirajte suprotno od kazaljke na satu da se spustite.

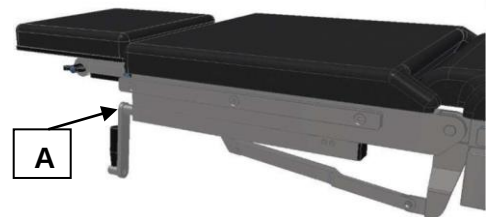

8.3 Torakalni rez

Umetnite ručicu u položaj (B) i okrenite je u smjeru kazaljke na satu kako biste podigli prsni dio. Rotacija suprotno od kazaljke na satu spušta prsni dio.





8.4 Sekcija nogu

Dijelovi nogu koji dolaze s operacijskim stolom mogu se podešavati ručno. Mogu se isporučiti dvije vrste modela, s dvije sekcije i s četiri sekcije.

Sekcija nogu s četiri segmenta



Sekcija nogu s dva segmenta



Oba se mogu podešavati gore ili dolje. Mogu se raširiti i izvući pod kutom od 90°.

8.4.1 Umetanje dijela noge

Nakon provjere je li vijak krila odvrnut, uvedite dio noge u pretinac vijka, držeći dio noge nagnutim



Držite dio noge nagnutim i umetnite spoj dijela nogu u spojnicu na stolu.



Položaj dijela noge kako želite (nastavite podupirati dio noge).



Nakon provjere pravilnog umetanja u vodilicu, zategni vijak krila (sada možeš otpustiti dio noge).



8.4.2 Podešavanje dijela noge

Za podešavanje nagiba dijela nogu s 4 segmenta, jednostavno koristite polugu. Prešanjem unutarnji mehanizam podiže ili spušta dio ovisno o tome je li gurnut prema dolje ili prema gore. Za zaključavanje položaja kada se dosegne željena visina, jednostavno otpustite polugu.



Za raširenje dijelova noge, odvrnite gumb i otvorite dio nogice maksimalno za 90°, prije bilo kakvih drugih zahvata potpuno zategnite gumb.





8.4.3 Odvajanje dijela noge

Otpustite vijak krila jednom rukom, a drugom poduprte dio noge.



Nakon što provjerite je li vijak krila pričvršćen, nagните dio noge.



Držeći dio noge nagnutim, izvucite dio nogu iz odjeljka za konektor.



8.4.4 Segmenti nogu koji se šire

Otvorite zasun okrećući kvaku suprotno od kazaljke na satu.




Poduprte dio noge jednom rukom, čvrsto držite bočnu ručku i drugom rukom raširite dio noge s drugog kraja.



Poduprte kraj najudaljeniji od drške jednom rukom i otvorite dio noge prema van maksimalno za 90° uz pomoć ručke.



8.5 Sekcija nogu s 4 segmenta

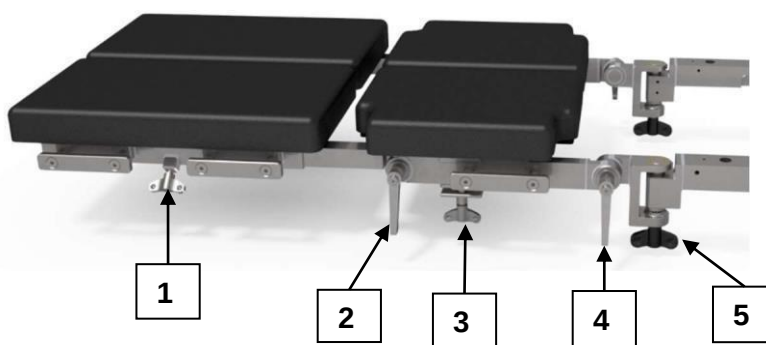



Za naganjanje dijela noge gore ili dolje, jednostavno koristite polugu (4) i vijak za palac (3):

- Otpustite vijak krila i držite dio noge
- Pomaknite polugu u položaj "otvoreno"

Mehanizam zuba se otvara i možete odabrati željeni položaj. Za zaključavanje dijela noge u ovom položaju, jednostavno ponovno pritisnite polugu (4) i potpuno je zategnite.

Da biste donji dio i gornji dio noge nagnuli za 90° (visina koljena), morate otvoriti polugu (2). Ovaj put se također otvara mehanizam zuba, na kojem se može nagnuti dio noge, i možete podešavati taj nagib. Presjek se može nagnuti pod kutom od 90°, i pozitivno i negativno.



Da biste raširili dio noge, olabavite gumb (5). Kad pronađete odgovarajući položaj, zatvorite gumb 5 dok ne vidite da se zubi mehanizma međusobno uklapaju.

8.6 Obnove

8.6.1 Produžetak glave (5 segmenata)

Za umetanje produžetka, provjerite jesu li vijci krila u istom položaju u kojem su ostali pri izvlačenju. Kad su zatvorene, otvorite ih odvijanjem (ne do kraja, jer bi mogle pasti).

Umetnite vodilice produžetka u rupe na stražnjem dijelu i zatim potpuno zatvorite vijke krila.



Za izvlačenje produžetka koristite dva vijka krila tako da ih olabavite, ali ne potpuno (mogu otpasti). Nakon što je ovaj postupak gotov, izvucite presjek prema van. Sada možete koristiti tablicu bez nastavka ili umetnuti druge dijelove.

8.6.2 Produžetak stranice glave (6 segmenata)

Za umetanje produžetka, provjerite jesu li vijci krila u istom položaju u kojem su ostali pri izvlačenju. Kad su zatvorene, otvorite ih odvijanjem (ne do kraja, jer bi mogle pasti). Umetnite vodilice produžetka u rupe na stražnjem dijelu i zatim potpuno zatvorite vijke krila.



Za izvlačenje produžetka koristite dva vijka krila tako da ih olabavite, ali ne potpuno (mogu otpasti). Nakon što je ovaj postupak gotov, izvucite presjek prema van. Sada možete koristiti tablicu bez nastavka ili umetnuti druge dijelove.

8.6.3 Bočno produženje nogu


Za umetanje nastavka, postupite ovako: Umetnite produžetak tako da se kopče ubace u odgovarajuće vodilice. Nakon što provjerite jesu li kopče pravilno umetnute, zategnite vijčane ručke.



8.7 Potpora zdjelice / naslon za rame

Prije nego što nastavite s umetanjem ovih segmenata, provjerite jesu li svi dijelovi nogu uklonjeni. Umetnite kopče zdjeličnog oslonca ili naslona za leđa u odgovarajuće vodilice. Nakon provjere da su kopče pravilno umetnute, zategnite ručke.

Za uklanjanje segmenta, odvrnite tipke, nagnite segment prema gore i izvucite ga iz odgovarajuće vodilice.

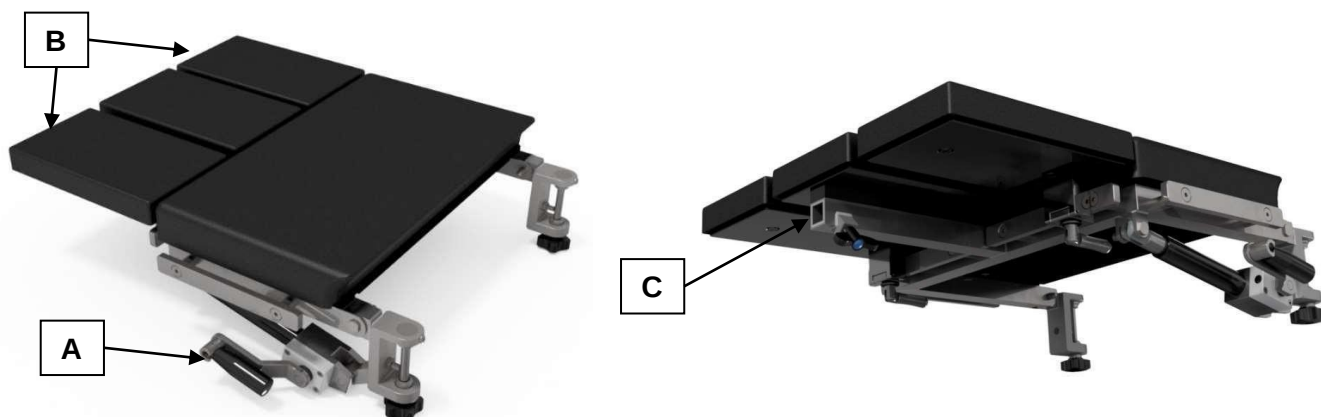

Za podešavanje zglobnog naslona za rame koristite ručicu (A) na sljedeći način:

- Nagnite se prema gore, okrenite se suprotno od kazaljke na satu,
- Nagnite prema dolje, okrenite u smjeru kazaljke na satu.

Možete ukloniti dva bočna nosača (B) naslona na sljedeći način:

- Otpustite ručku okrećući je u smjeru kazaljke na satu i pomaknite potporu koju želite ukloniti duž vodilice (C) da je izvučete

Za ponovno umetanje oba dijela, nastavite obrnutim redoslijedom:

- Pomaknite dio duž vodilice i zatim ga zaključajte okretanjem ručke suprotno od kazaljke na satu.

Možete dodati dijelove naslona za glavu iznad naslona za leđa na sljedeći način:

- Umetnite naslon za glavu (A) blizu vodilice (C) i pričvrstite ga na naslon pomoću krilnog vijka.



8.8 Klupa za klečanje


Za umetanje klupe za klečanje, postupite ovako: Umetnite klupu za klečeće klupe tako da je umetnete u odgovarajuću vodilicu.

Nakon provjere je li klupa za klečanje pravilno umetnuta, zategnite gumb (B).

Za uklanjanje klupe za klečanje, otpustite gumb (B), nagnite dio prema gore i izvucite ga iz vodilice.

Za podešavanje klupe za klečanje koristite ručicu (A):

- za podizanje, okretanje suprotno od kazaljke na satu,
- Okreni u smjeru kazaljke na satu prema nižem.

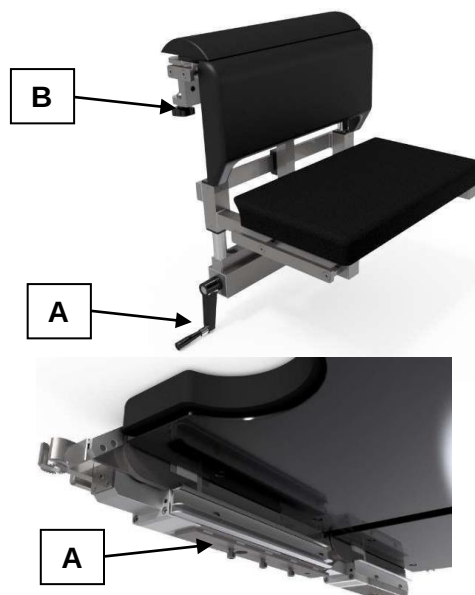

8.9 Segment zdjelice

Za umetnut segment činele, ubacite ga u odgovarajuće vodilice (A) smještene ispod ploče stola.

8.10 Zahtjevi

Preporučuje se redovita zamjena jastučića:

- svakih 5 godina, za slojeve od POLIURETANSKOG materijala
- Svakih 10 godina, za nadmadrace od MEMORY FOAM materijala

Bez obzira na vrstu materijala, morate odmah zamijeniti jastučice u slučaju trošenja ili oštećenja.

9 DODACI ZA CF MODELE

9.1 Klizni držač pribora

Prije nego što nastavite s umetanjem/uklanjanjem držača pribora, izvršite samoniveliranje stola (LEVEL).



Za umetanje držača, olabavite tipke bez vađenja, zatim postavite držač na bočne nastavke vrha i pomaknite ga u željeni položaj.

Za uklanjanje držača, otpustite tipke bez skidanja, zatim kliznite držač duž produžetaka dok se ne ukloni.

Bez obzira jesu li tipke maksimalno zategnute ili ne, držač je izrađen tako da prati sam pokret tijekom uzdužnih translacijskih pomaka ploče i integralno klizi s pločom bez blokiranja.

9.2 Stabilizacijske šipke

Za umetnutje šipki, odvrnite kotačiće bez skidanja, zatim ih provucite duž prednje vodilice operacijskog stola. Kad se postigne željeni položaj, zavrnite kotačiće natrag.

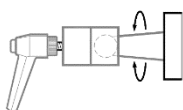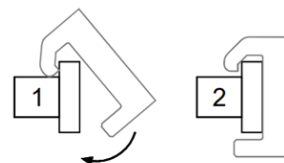

Za podešavanje visine štapa, podesite ručicu.

Za uklanjanje šipke, odvrnite kotačiće bez potpunog skidanja, zatim kliznite duž vodilice dok se ne ukloni.

Preporučuje se umetnuti šipku prije izvođenja sljedećih pokreta: longitudinalna translacija, maksimalno savijanje.




Savijanje stola (duljina) ne više od 1100 mm bez sigurnosne šipke!



Uvijek umetnite sigurnosne šipke prije bočnog nagiba kako biste smanjili rizik od prevrtanja!
Otpustite sigurnosne šipke kad aktivirate pokrete podizanja/spuštanja.

Uklonite šipke, u slučaju Trendelenburg / obrnutog Trendelenburga, bočno nagnjanje (desno / lijevo) i pri resetiranju (niveliranje).
To sprječava otpor sigurnosnih šipki, što bi moglo oštetiti stol.

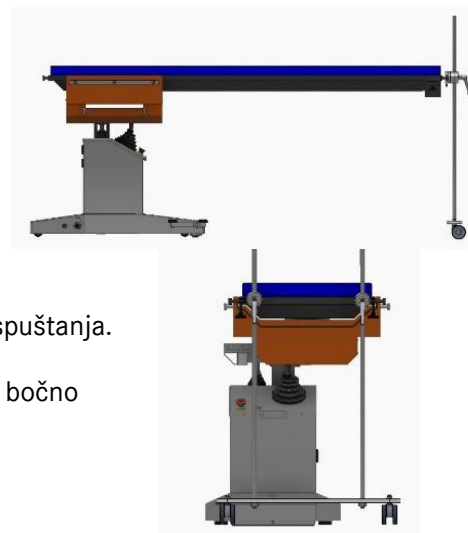

10 SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

10.1 Pohrana

Ako se operacijski stol treba pohraniti, mora se vratiti u izvorno pakiranje, zajedno s dodacima, i posložiti točno onako kako ga je isporučio proizvođač. Pakiranje štiti uređaj od uobičajenih udaraca i vibracija koje se mogu pojaviti tijekom transporta.

Također, pridržavajte se sljedećih uvjeta skladištenja:

- Temperatura: -5 °C / +35 °C;
- Vlažnost: <50%;
- Čisto, bez prašine okruženje.

10.2 Promet

Stol i njegovi dodaci moraju se transportirati u originalnom pakiranju. Pakiranje štiti uređaj od uobičajenih udaraca i vibracija koje se mogu pojaviti tijekom transporta.

Transportna ambalaža nije vodootporna!

11 ZBRINJAVANJE

Na kraju svog životnog vijeka, medicinski uređaj mora biti zbrinut od strane ovlaštene tvrtke u skladu s važećim zakonodavstvom specifičnim za pojedine zemlje.

12 UPOTREBA S NEORIGINALNIM DODACIMA

Operacijski stolovi mogu se koristiti s dodacima drugih proizvođača, jer su vodilice (sučelja) standardizirane. U tom slučaju, kako bi se osigurao siguran i ispravan rad, potrebno je provjeriti je li postignut maksimalni kapacitet (nosivost) odgovarajućih segmenata, uzimajući u obzir i težinu pacijenta i sastavljene dodatke.



13 ODRŽAVANJE, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

Važno je uvijek isključiti stol s napajanja uklanjanjem utikača prije bilo kakvog održavanja ili čišćenja. Zabranjeno je koristiti abrazivna sredstva za čišćenje i dezinfekcijska sredstva. Također su zabranjeni deterdženti s klorom, kloridima i octenom kiselinom.

13.1 Segmenti

Briga o segmentima ograničena je na redovito čišćenje odgovarajućim tvarima.

Sljedeća sredstva za čišćenje odobrena su za komponente od nehrđajućeg čelika: sva komercijalno dostupna sredstva za čišćenje od nehrđajućeg čelika. Sljedeća sredstva za čišćenje odobrena su za plastične komponente: sva blaga alkalna sredstva za čišćenje.

Sva dezinfekcijska sredstva dostupna na tržištu mogu se koristiti, pod uvjetom da ispunjavaju specifične zahtjeve (s CE oznakom).

13.2 Zahtjevi

Jastučici su potpuno uklonjivi kako bi se segmenti temeljito očistili čak i ispod. Osim toga, tretmani provedeni na površinama čine čišćenje i dezinfekciju slojeva učinkovitijima.

Prije nego što počnete s čišćenjem, uklonite podloge s segmenata kako biste izbjegli nakupljanje materijala i ostatke prljavštine između vrha segmenata i podloga.

Za jastučice su dopuštena sljedeća sredstva za čišćenje: sva sredstva s niskom alkalnom vrijednošću.

Sva dezinfekcijska sredstva dostupna na tržištu mogu se koristiti, pod uvjetom da ispunjavaju specifične zahtjeve (s CE oznakom).

13.3 Transportna kolica

Briga o transportnim kolicima ograničena je na čišćenje nakon završetka servisa te redovite preglede i podmazivanje pokretnih dijelova.

13.3.1 Čišćenje

Sljedeća sredstva za čišćenje odobrena su za komponente od nehrđajućeg čelika: sva komercijalno dostupna sredstva za čišćenje od nehrđajućeg čelika.

Sljedeća sredstva za čišćenje odobrena su za plastične komponente: sva blaga alkalna sredstva za čišćenje.

Sva dezinfekcijska sredstva dostupna na tržištu mogu se koristiti, pod uvjetom da ispunjavaju specifične zahtjeve (s CE oznakom).

13.3.2 Testiranje i podmazivanje

- Redovito provjeravajte kotače na trošenje i mijenjajte ih ako je potrebno.
- Redovito provjeravajte spojeve vijaka.
- Redovito podmazujte sve pokretne i mehaničke dijelove.

14 PRIJAVLJIVANJE PROBLEMA S PROIZVODOM



U skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i našim sustavom upravljanja kvalitetom, svi problemi s proizvodom moraju se prijaviti proizvođaču.

Tijekom radnog vremena možete nas kontaktirati telefonom na +49 (0) 07461 / 1701-0.

Izvan redovnog radnog vremena, molimo vas da pošaljete e-poruku na safety@tekno-medical.com.

Ozbiljni incidenti također se moraju prijaviti lokalnim vlastima nadležnim za njihovu lokaciju.

15 JAMSTVO

Proizvodi su izrađeni od visokokvalitetnih materijala i prolaze kontrolu kvalitete prije isporuke. U slučaju bilo kakvih nedostataka, obratite se našem servisnom odjelu. Tekno-Medical ne može jamčiti da su proizvodi prikladni za bilo koji određeni postupak. To mora utvrditi korisnik. Tekno-Medical ne preuzima nikakvu odgovornost za slučajnu ili posljedičnu štetu.

Tekno-Medical ne preuzima nikakvu odgovornost ako se može dokazati da su ove upute za uporabu prekršene.

**16 SERVIS I POPRAVAK**

Ne pokušavajte sami popravljati ili mijenjati proizvod. To je isključiva odgovornost ovlaštenog osoblja proizvođača. Neispravni proizvodi moraju proći cijeli proces obnove prije nego što se vrate na popravak. Za povrat, molimo koristite naš obrazac zahtjeva za RMA i certifikat o dekontaminaciji.

Obrasce možete pronaći na našoj početnoj stranici: <https://www.tekno-medical.com/de/service/repaturservice/>

17 SIMBOL

Simboli korišteni u ovim uputama i na naljepnici imaju sljedeće značenje prema normi DIN EN ISO 15223-1:

Simbol	Opis	Simbol	Opis
	Pažnja!		Proizvođač
	Medicinski uređaj		Datum proizvodnje
	Unsteril		Slijedite upute za korištenje
	Kataloški broj		Zaštitite od sunčeve svjetlosti
	Oznaka serije		Čuvajte na suhom mjestu
	Jedinstvena identifikacija proizvoda		CE oznaka



18 POPIS PROIZVODA

Tribina: 23.10.2024.

300-1000	300-6020	301-2010	302-2040	305-0100	306-8000
300-1010	300-6030	301-2011	302-3000	305-0110*	306-9010
300-1020	300-6040	301-2020	302-4000	305-0130	306-9020
300-1030	300-6050	301-2021	302-5000	305-0200	307-1000
300-1040	300-6160	301-2030	302-8000	305-0220	307-1010
300-1050	300-6190	301-2040	302-9000	305-0260	307-1020
300-1060	300-7000	301-2041	302-9001	305-0300	307-6000
300-1070	300-8000	301-2050	302-9021	305-0400	307-8002
300-1110	300-8010	301-2060	302-9190	305-0500	307-8003
300-1120	300-8020	301-2070	303-0000	305-0830	308-0000
300-1130	300-8040	301-2080	303-0010	305-1200	308-3000
300-1160	300-8050	301-2090	303-0020	305-1300	308-3010
300-1170	300-9000	301-2100	303-0040	305-1410	308-4000
300-1180	301-0001	301-2200	303-1000	305-1420	308-4010
300-1330	301-0002	301-3050	303-2000	305-1600	308-5000
300-2000	301-0010	301-5000	303-3000	305-1610	309-0000
300-2010	301-0030	301-5011	303-3010	305-1710	309-1000
300-2020	301-0040	301-5020	303-3070	305-1720	309-2000
300-2030	301-0050	301-5030	303-3080	305-2000	309-2010
300-2050	301-0101	301-6000	303-3140	305-2010	309-2020
300-2070	301-0200	301-6010	303-3220	305-2100	309-2030
300-2120	301-0202*	301-6020	303-5000	305-2300	309-2040
300-2180	301-0210	301-6030	303-8000	305-2400	309-3000
300-2190	301-0300	301-6050	303-9010	305-2600	309-3020
300-2191	301-0320*	301-8000	303-9020	305-3000	309-4000
300-3000	301-0325	301-8160	304-0020	305-3001	309-4040
300-4010	301-0330	302-0000	304-3000	305-3100	309-4193
300-5010	301-0335	302-2001	304-4000	306-1000	309-4210
300-5130	301-0401	302-2010	304-9000	306-1010	309-4211
300-5190	301-1020	302-2020	305-0000	306-2000	309-4419
300-6010	301-2000	302-2030	305-0010	306-7010	309-6010