



» ACCESSOIRES VOOR OPERATIETAFELS «



Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH

Sattlerstr. 11
78532 Tuttlingen
Duitsland

SRN: DE-MF-000005822

Telefon: +49 (0) 7461 / 17 01 0

Post: mail@tekno-medical.com

Web: www.tekno-medical.com



INHOUD

1	Toepassingsgebied	4
2	Handling	4
3	Doel	4
4	Contra-indicaties	4
5	Patiëntenpopulatie	4
6	Beoogde gebruikers	4
7	Opmerkingen	4
7.1	Milieuomstandigheden	4
7.2	Combinatie met andere apparaten of medische accessoires	5
7.3	Demontage en aanpassingen	5
8	Handmatige aanpassingen	5
8.1	Hoofdbord	5
8.1.1	Hoofdbordverstelling (5 secties)	5
8.1.2	Hoofdeinde verstelling (6 secties)	6
8.2	Rugleuning	6
8.3	Thoraxsectie	6
8.4	Legsectie	7
8.4.1	Een beensectie inbrengen	7
8.4.2	Afstelling van een beensectie	7
8.4.3	Detachering van een beensectie	8
8.4.4	Spreadende pootsegmenten	8
8.5	Beensectie met 4 segmenten	8
8.6	Verlengingen	9
8.6.1	Verlenging van de hoofdzijde (5 segmenten)	9
8.6.2	Verlenging van de hoofdzijde (6 segmenten)	9
8.6.3	Zijdelingse verlenging van de poten	10
8.7	Bekkensteun / rugsteun voor de schouder	10
8.8	Knielende bank	11
8.9	Bekkensegment	11
8.10	Vereisten	11
9	Accessoires voor CF-modellen	11
9.1	Schuifaccessoirehouder	11
9.2	Stabiliteitsstangen	11
10	Opslag en transport	12
10.1	Opslag	12
10.2	Vervoer	12
11	Afstoting	12
12	Gebruik met niet-originele accessoires	12
13	Onderhoud, reiniging en desinfectie	13
13.1	Segmenten	13
13.2	Vereisten	13
13.3	Transportwagen	13
13.3.1	Schoonmaak	13
13.3.2	Testen en smering	13
14	Productproblemen melden	13
15	Garantie	14
16	Service en reparatie	14
17	Symbol	14
18	Productlijst	15



Deze handleiding moet zorgvuldig worden gelezen voordat je het accessoire gebruikt om vertrouwd te raken met de functies. Naleving van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften garandeert de hoge kwaliteit van de producten, eenvoudige hantering en een lange gebruiksduur.

1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze gebruiksaanwijzing is geldig voor de volgende producten:



- **Accessoires voor operatietafels.** (Zie productlijst in de laatste alinea.)

2 HANDLING

De producten mogen alleen worden gebruikt voor hun beoogde gebruik in medische specialismen door passend getraind en gekwalificeerd personeel. De verantwoordelijkheid voor de selectie van producten voor specifieke toepassingen, passende training en informatie, en voldoende ervaring met het omgaan met de producten ligt bij de behandelend arts of gebruiker.

3 DOEL

Ondersteuning van de patiënt in de verschillende fasen van de operatie, zoals voorbereiding op de operatie, het toedienen van anesthesie, uitvoering van de procedure en het ontwaken van de patiënt uit de narcose na de operatie.

4 CONTRA-INDICATIES

In principe zijn er geen contra-indicaties gevonden voor het gebruik van accessoires voor operatietafels.

5 PATIËNTENPOPULATIE

Het gebruik van operatietafels en hun accessoires is aanbevolen voor alle patiënten die verschillende diagnostische onderzoeken of operaties in de operatiekamer moeten ondergaan.

6 BEOOGDE GEBRUIKERS

Het gebruik van de operatietafels en hun accessoires in daadwerkelijke gebruik is exclusief voorbehouden aan getrainde specialisten.

Schoonmaak en onderhoud mogen ook alleen worden uitgevoerd door getrainde specialisten.

7 OPMERKINGEN

7.1 Milieuomstandigheden

De operatietafel en accessoires moeten worden gebruikt in een operatiekamer die groot genoeg is om het apparaat te huisvesten en de bewegingen mogelijk te maken.

De operationele omgeving moet ook waarborgen dat aan de volgende arbeidsvoorwaarden wordt voldaan:

- Temperatuur van 10°C tot 35°C
- Luchtvochtigheid van 30% tot 70%

De operatietafel moet worden gebruikt in kamers met geschikte gladde en antistatische vloeren en met aardingsverbindingen.



7.2 Combinatie met andere apparaten of medische accessoires

Lees voordat u andere apparatuur of accessoires gebruikt, zorgvuldig de handleiding van het apparaat of accessoire en zorg ervoor dat de operatietafel en de accessoires niet aan negatieve effecten worden blootgesteld.

Neem contact op met uw dealer of ons bedrijf voordat u accessoires van een externe leverancier installeert. Sommige accessoires kunnen niet worden gemonteerd!

Voor hygiënische redenen gebruik je gesteriliseerde doekjes op de plekken van dit product die in contact komen met de patiënt.

Als je de operatietafel gebruikt, controleer dan de posities van de andere apparatuur. Tijdens de bediening kunnen ze elkaar raken en beschadigd raken.

7.3 Demontage en aanpassingen

Probeer de tafel of accessoires niet uit elkaar te halen of aan te passen om het risico op storing te vermijden.

Verander de accessoires niet zonder toestemming van de fabrikant. In het geval van aanpassing van het product moeten passende onderzoeken en tests worden uitgevoerd om het veilige gebruik te waarborgen.

8 HANDMATIGE AANPASSINGEN

De bedieningstafels maken handmatige instellingen mogelijk voor de volgende segmenten:


- Hoofdbord,
- Thorax,
- Rugleuning,
- Uitbreiding van het bekken,
- Verlenging van de kniehendel,
- Verlenging van de rugleuning,
- Beensecties.

8.1 Hoofdbord

Het hoofdgedeelte dat bij de operatietafel wordt geleverd, maakt negatieve en positieve aanpassing mogelijk; daarnaast is het mogelijk deze te verwijderen en te vervangen door andere hoofdonderdelen uit de accessoirelijst (zie accessoirecatalogus).

8.1.1 Hoofdbordverstelling (5 secties)

Om het hoofdeinde af te stellen en eruit te trekken, doe je het volgende:

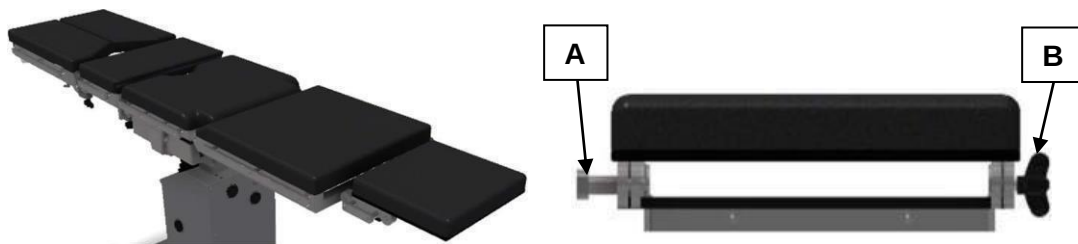

Om de kanteling aan te passen, gebruik je handvat A en schroef je het vast. Zodra je het handvat hebt geopend, stel je het hoofdeinde aan en sluit je bij de positie het handvat (voordat je het gewicht van de patiënt laat rusten).

Om het hoofdeinde eruit te halen, gebruik je de twee handgrepen (A en B) door ze los te schroeven, maar niet helemaal (ze kunnen eraf vallen). Als dit proces klaar is, trek je het hoofdbord naar buiten. Nu kun je de tafel gebruiken zonder hoofdeinde of andere hoofdeinde inbrengen. Om de andere hoofdborden in te brengen, volg je de onderstaande procedures om het hoofdeinde in te plaatsen.



Om het hoofdeinde in te brengen, zorg ervoor dat handvatten A en B op dezelfde plek zitten als bij het uittrekken.

Als ze gesloten zijn, open ze dan door ze los te draaien (niet helemaal, want ze kunnen eraf vallen). Steek de bevestigingen van het hoofdeinde in de gaten van de achterkant en sluit dan de handvatten tot aan het uiteinde.

8.1.2 Hoofdeinde verstelling (6 secties)

Om het hoofdeinde af te stellen en eruit te trekken, doe je het volgende:



Om de kanteling aan te passen, gebruik je handvat A en schroef je het vast. Als je het handvat hebt geopend, stel je het hoofdeinde aan en sluit je het handvat zodra je die positie bereikt.


Om het hoofdeinde eruit te halen, gebruik je de twee handgrepen (A en B) door ze los te schroeven, maar niet helemaal (ze kunnen eraf vallen). Als dit proces klaar is, trek je het hoofdbord naar buiten. Nu kun je de tafel gebruiken zonder hoofdeinde of andere hoofdeinde inbrengen. Om de andere hoofdborden in te brengen, volg je de onderstaande procedures om het hoofdeinde in te plaatsen.

Om het hoofdeinde in te brengen, zorg ervoor dat handvatten A en B op dezelfde plek zitten als bij het uittrekken.

Als ze gesloten zijn, open ze dan door ze los te draaien (niet helemaal, want ze kunnen eraf vallen). Steek de bevestigingen van het hoofdeinde in de gaten van de achterkant en sluit dan de handvatten tot aan het uiteinde.

8.2 Rugleuning

Het achterste gedeelte wordt afgesteld met de kruk in positie (A). Steek de kruk in zoals aangegeven en draai hem met de klok mee om het achterste deel op te tillen. Draai tegen de klok in om te verlagen.

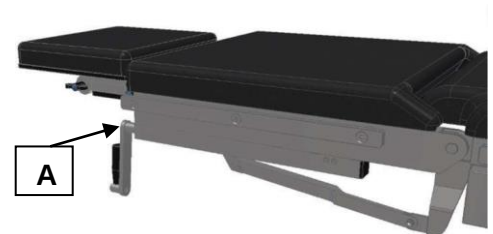

8.3 Thoraxsectie

Plaats de kruk in positie (B) en draai hem met de klok mee om het thoracale gedeelte te tillen. Tegen de klok in draaien verlaagt de thoracale sectie.





8.4 Legsectie

De beensecties die bij de operatietafel worden geleverd, kunnen handmatig worden afgesteld. Er kunnen twee soorten modellen worden geleverd, met twee secties en met vier secties.

Beensectie met vier segmenten



Beensectie met twee segmenten



Beide zijn verstelbaar omhoog of omlaag. Ze kunnen worden uitgespreid en 90° naar buiten getrokken.

8.4.1 Een beensectie inbrengen

Nadat je hebt gecontroleerd of de vleugelschroef los is, breng je het pootdeel in het schroefcompartiment, waarbij je het pootdeel schuin houdt



Houd het pootgedeelte schuin en steek de verbinding van het beengedeelte in de koppeling op het tafelblad.



Positioneer het beengedeelte zoals gewenst (blijf het beengedeelte ondersteunen).



Na het controleren van de juiste insteek in de geleider, draai je de vleugelschroef vast (nu kun je het beendeel losmaken).



8.4.2 Afstelling van een beensectie

Om de helling van het beengedeelte met 4 segmenten aan te passen, gebruik je simpelweg de hendel. Door te drukken tilt of verlaagt het interne mechanisme het gedeelte, afhankelijk van of het naar beneden of omhoog wordt geduwd. Om de positie te vergrendelen zodra de gewenste hoogte is bereikt, laat je simpelweg de hendel los.



Om de pootsecties te spreiden, schroef je de knop los en open je de pootsectie maximaal 90°, draai je de knop volledig vast voordat je andere handelingen uitvoert.





8.4.3 Detachering van een beensectie

Maak de vleugelschroef met één hand los en ondersteun het beengedeelte met de andere hand.



Na te hebben gecontroleerd of de vleugelschroef vastzit, kantel je het beengedeelte.



Houd het pootgedeelte schuin en trek het pootgedeelte uit het connectorcompartiment.



8.4.4 Spreidende pootsegmenten

Open het slot door de hendel tegen de klok in te draaien.




Ondersteun het beengedeelte met één hand, houd het zijhandvat stevig vast en spreid het beengedeelte aan de andere kant met de andere hand.

Ondersteun het uiteinde het verst van het handvat met één hand en open het beengedeelte met maximaal 90° naar buiten met behulp van het handvat.



8.5 Beensectie met 4 segmenten

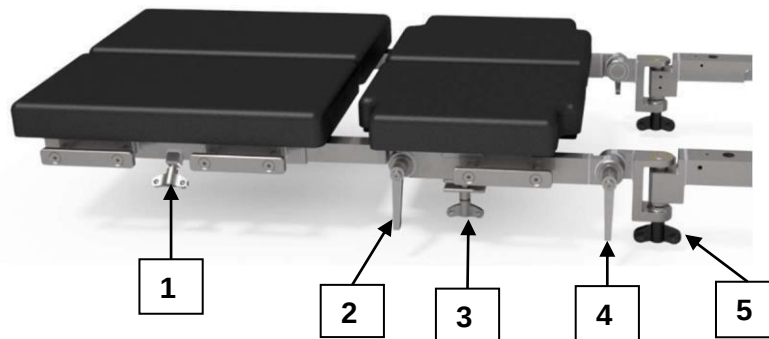



Om het beengedeelte omhoog of omlaag te kantelen, gebruik je simpelweg de hendel (4) en de duim-schroef (3):

- Maak de vleugelschroef los en houd het beengedeelte vast
- Zet de hendel naar de "open" stand

Het tandmechanisme opent en je kunt de gewenste positie kiezen. Om het beendeel in deze positie te vergrendelen, druk je simpelweg de hendel (4) opnieuw in en draai je hem helemaal aan.

Om het onderste en het bovenste deel van het beengedeelte 90° te kantelen (kniehoogte), moet je de hendel openen (2). Ook deze keer opent het tandmechanisme, waarop het beendeel gekanteld kan worden, en kun je deze helling aanpassen. De doorsnede kan zowel positief als negatief met 90° worden gekanteld.



Om het beengedeelte te spreiden, maak je de knoop los (5). Zodra je de juiste positie hebt gevonden, sluit je knop 5 totdat je ziet dat de tanden van het tandmechanisme in elkaar grijpen.

8.6 Verlengingen

8.6.1 Verlenging van de hoofdzijde (5 segmenten)

Om de verlenging in te brengen, zorg ervoor dat de vleugelschroeven in dezelfde positie zitten als bij het uittrekken. Als ze dicht zijn, open je ze door ze los te draaien (niet helemaal uit, want ze kunnen eraf vallen). Steek de geleiders van de verlenging in de gaten van het achterste deel en sluit dan de vleugelschroeven helemaal.



Om de verlenging eruit te trekken, gebruik je de twee vleugelschroeven door ze los te draaien, maar niet helemaal (ze kunnen eraf vallen). Als dit proces is voltooid, sleep je het gedeelte naar buiten. Nu kun je de tabel gebruiken zonder de extensie of andere secties invoegen.

8.6.2 Verlenging van de hoofdzijde (6 segmenten)

Om de verlenging in te brengen, zorg ervoor dat de vleugelschroeven in dezelfde positie zitten als bij het uittrekken. Als ze dicht zijn, open je ze door ze los te draaien (niet helemaal uit, want ze kunnen eraf vallen). Steek de geleiders van de verlenging in de gaten van het achterste deel en sluit dan de vleugelschroeven helemaal.



Om de verlenging eruit te trekken, gebruik je de twee vleugelschroeven door ze los te draaien, maar niet helemaal (ze kunnen eraf vallen). Als dit proces is voltooid, sleep je het gedeelte naar buiten. Nu kun je de tabel gebruiken zonder de extensie of andere secties invoegen.




8.6.3 Zijdellingse verlenging van de poten

Om de verlenging in te brengen, gaat u als volgt te werk: Plaats de verlenging door de sluitingen in de juiste geleiders te plaatsen. Nadat je hebt gecontroleerd of de sluitingen correct zijn geplaatst, draai je de schroefknoppen vast.



8.7 Bekkensteun / rugsteun voor de schouder

Voordat je deze segmenten plaatst, zorg ervoor dat alle beendelen zijn verwijderd. Plaats de sluitingen van de bekkensteun of rugleuning in de juiste geleiders. Nadat je hebt gecontroleerd of de sluitingen correct zijn geplaatst, draai je de knoppen strakker aan. Om het segment te verwijderen, schroef je de knoppen los, kantel je het segment omhoog en trek je het uit de bijbehorende geleiding.

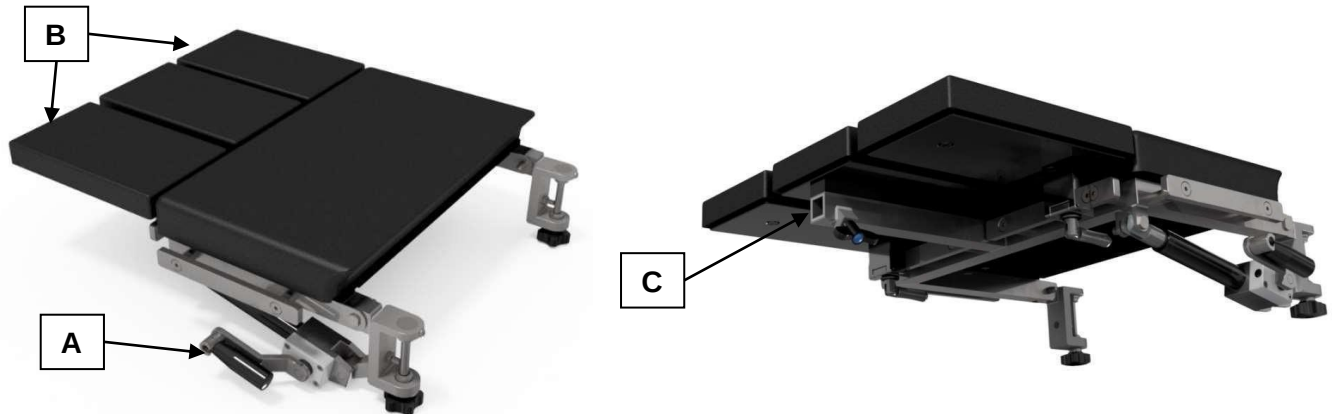

Om de gearticuleerde rugleuning voor de schouder af te stellen, gebruik je de krukas (A) als volgt:

- kantel omhoog, draai tegen de klok in,
- kantel naar beneden, draai met de klok mee.

Je kunt de twee zijsteundelen (B) van de rugleuning als volgt verwijderen:

- Maak het handvat los door het met de klok mee te draaien en schuif de steun die je wilt verwijderen langs de geleider (C) om hem eruit te trekken

Om de twee secties opnieuw in te voegen, gaat u in omgekeerde volgorde verder:

- Schuif het gedeelte langs de geleiding en vergrendel het vervolgens door het handvat tegen de klok in te draaien.

Je kunt hoofdsteunsecties boven de rugleuning als volgt toevoegen:

- Plaats de hoofdsteun (A) bij de geleider (C) en bevestig deze met de vleugelschroef aan de rugleuning.



8.8 Knielende bank


Om de knielbank in te brengen, gaat u als volgt te werk: Plaats de knielbank door deze in de juiste geleiding te plaatsen.

Nadat je hebt gecontroleerd of de knielbank correct is geplaatst, draai je de knop (B) strakker aan.

Om de knielende bank te verwijderen, maak je de knop (B) los, kantel je het onderdeel omhoog en trek je het uit de geleiding.

Om de knielende bank af te stellen, gebruik je de kruk (A):

- voor tillen, draaien tegen de klok in,
- Draai met de klok mee naar lager.

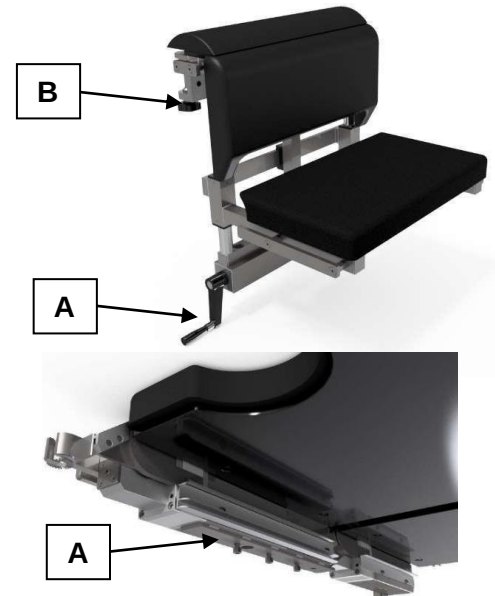

8.9 Bekkensegment

Om het bekkensegment in te brengen, schuif je het in de juiste geleiders (A) onder het tafelblad.

8.10 Vereisten

Het wordt aanbevolen om de pads regelmatig te vervangen:

- elke 5 jaar, voor overlays gemaakt van POLYURETHAAN-materiaal
- Elke 10 jaar, voor TRAAGSCHUIM-topstukken

Ongeacht het type materiaal moet u de pads onmiddellijk vervangen bij slijtage of schade.

9 ACCESSOIRES VOOR CF-MODELLEN

9.1 Schuifaccessoirehouder

Voordat je de accessoirehouder inbrengt/verwijdert, voer je een zelfnivellering van de tafel uit (LEVEL).

Om de houder in te brengen, maak je de knoppen los zonder ze te verwijderen, plaats je de houder in de zijverlengingen van de bovenkant en schuif je hem in de gewenste positie.


Om de houder te verwijderen, maak je de knoppen los zonder ze te verwijderen, en schuif je de houder langs de verlengstukken totdat hij verwijderd is.

Ongeacht of de knoppen maximaal zijn aangedraaid of niet, is de houder zo gebouwd dat hij de beweging zelf volgt tijdens longitudinale translatieverbuigingen van de plaat en integraal met de plaat schuift zonder blokkering.


9.2 Stabiliteitsstangen

Om de stangen in te brengen, schroef je de knoppen los zonder ze te verwijderen, schuif je ze dan langs de voorste geleider van de operatietafel.

Wanneer de gewenste positie is bereikt, schroef je de knoppen weer vast.

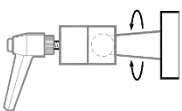

Om de hoogte van de paal aan te passen, stel je de kruk aan.

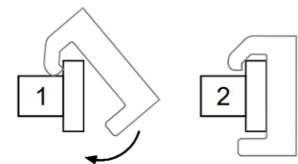

Om de stang te verwijderen, schroef je de knoppen los zonder ze helemaal te verwijderen, en schuif je dan langs de geleider totdat deze verwijderd is.

Het wordt aanbevolen de staaf in te brengen voordat je de volgende bewegingen uitvoert: longitudinale translatie, maximale doorbuiging.



Doorbuiging van de tafel (lengte) niet meer dan 1100 mm zonder veiligheidsstang!



Steek altijd de veiligheidsstaven in voordat je een zijkanteling uitvoert om het risico op omvallen te verkleinen!
Maak de veiligheidsstangen los wanneer je de lift-/lower-bewegingen activeert.

Verwijder de stangen, in het geval van Trendelenburg / Reverse Trendelenburg, zijwaarts kantelen (rechts / links) en bij het resetten (nivelleren).
Dit voorkomt dat de veiligheidsstangen weerstand bieden, wat schade aan de tafel kan veroorzaken.



10 OPSLAG EN TRANSPORT

10.1 Opslag

Als de operatietafel opgeslagen moet worden, moet deze samen met de accessoires in de originele verpakking worden geplaatst en exact worden gerangschikt zoals deze door de fabrikant is geleverd. De verpakking beschermt het apparaat tegen normale schokken en trillingen die tijdens het transport kunnen optreden.

Ook moet je voldoen aan de volgende opslagvoorwaarden:

- Temperatuur: -5 °C / +35 °C;
- Luchtvochtigheid: <50%;
- Schone, stofvrije omgeving.

10.2 Vervoer

De tafel en de accessoires moeten in de originele verpakking worden vervoerd. De verpakking beschermt het apparaat tegen normale schokken en trillingen die tijdens het transport kunnen optreden.

De transportverpakking is niet waterdicht!

11 AFSTOTING

Aan het einde van zijn levensduur moet het medisch hulpmiddel worden afgevoerd door een bevoegde instantie in overeenstemming met de toepasselijke landspecifieke wetgeving.

12 GEBRUIK MET NIET-ORIGINELE ACCESSOIRES

De bedieningstafels kunnen worden gebruikt met accessoires van andere fabrikanten, aangezien de geleiders (interfaces) gestandaardiseerd zijn. In dit geval is het om een veilige en correcte werking te garanderen noodzakelijk te controleren of de maximale capaciteit (laadcapaciteit) van de overeenkomstige segmenten is bereikt, waarbij zowel rekening wordt gehouden met het gewicht van de patiënt als de gemonteerde accessoires.



13 ONDERHOUD, REINIGING EN DESINFECTIE

Het is belangrijk om de tafel altijd los te koppelen van de voeding door de stekker te verwijderen voordat je onderhoud of schoonmaak uitvoert.

Het is verboden om schurende reinigers en desinfectiemiddelen te gebruiken. Chloor-, chloride- en azijnzuur-detergenten zijn ook verboden.

13.1 Segmenten

De verzorging van de segmenten is beperkt tot regelmatige reiniging met geschikte stoffen.

De volgende reinigingsmiddelen zijn goedgekeurd voor roestvrijstalen componenten: alle commercieel verkrijgbare roestvrijstalen schoonmakers. De volgende reinigingsmiddelen zijn goedgekeurd voor kunststofonderdelen: alle milde alkalische reinigingsmiddelen.

Alle ontsmettingsmiddelen die op de markt verkrijgbaar zijn, mogen worden gebruikt, mits ze voldoen aan de specifieke eisen (met CE-markering).

13.2 Vereisten

De pads zijn volledig verwijderbaar om de segmenten zelfs eronder volledig schoon te maken. Daarnaast maken de behandelingen die op de oppervlakken worden uitgevoerd het reinigen en desinfecteren van de overlays effectiever.

Verwijder voordat je begint met schoonmaken de pads van de segmenten om materiaalopbouw en achtergebleven vuil tussen de bovenkant van de segmenten en de pads te voorkomen.

De volgende reinigingsmiddelen zijn toegestaan voor de pads: alle reinigers met een lage alkalische waarde.

Alle ontsmettingsmiddelen die op de markt verkrijgbaar zijn, mogen worden gebruikt, mits ze voldoen aan de specifieke eisen (met CE-markering).

13.3 Transportwagen

De verzorging van de transportwagens is beperkt tot het schoonmaken na afloop van de dienst en regelmatige inspectie en smering van de bewegende delen.

13.3.1 Schoonmaak

De volgende reinigingsmiddelen zijn goedgekeurd voor roestvrijstalen componenten: alle commercieel verkrijgbare roestvrijstalen schoonmakers.

De volgende reinigingsmiddelen zijn goedgekeurd voor kunststofonderdelen: alle milde alkalische reinigingsmiddelen.

Alle ontsmettingsmiddelen die op de markt verkrijgbaar zijn, mogen worden gebruikt, mits ze voldoen aan de specifieke eisen (met CE-markering).

13.3.2 Testen en smering

- Controleer regelmatig de wielen op slijtage en vervang ze indien nodig.
- Controleer regelmatig de schroefverbindingen op stevigheid.
- Smeer alle bewegende en mechanische onderdelen regelmatig.

14 PRODUCTPROBLEMEN MELDEN



In overeenstemming met de eisen van Verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen en ons kwaliteitsmanagementsysteem moeten alle productproblemen aan de fabrikant worden gemeld.

Tijdens kantooruren kunt u ons telefonisch bereiken op +49 (0) 07461 / 1701-0.

Buiten de reguliere openingstijden kunt u een e-mail sturen naar safety@tekno-medical.com.

Ernstige incidenten moeten ook worden gemeld aan de lokale autoriteit die verantwoordelijk is voor de betreffende locatie.



15 GARANTIE

De producten worden vervaardigd uit hoogwaardige materialen en ondergaan vóór levering een kwaliteitscontrole. Mochten er gebreken optreden, neem dan contact op met onze klantenservice. Tekno-Medical kan niet garanderen dat de producten geschikt zijn voor een specifieke procedure. Dit dient de gebruiker zelf te bepalen. Tekno-Medical aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onopzettelijke of gevolgschade.

Tekno-Medical aanvaardt geen aansprakelijkheid indien bewezen kan worden dat deze gebruiksaanwijzing is overtreden.

16 SERVICE EN REPARATIE

Probeer zelf geen reparaties of aanpassingen aan het product uit te voeren. Dit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van geautoriseerd personeel van de fabrikant. Defecte producten moeten het volledige revisieproces doorlopen voordat ze voor reparatie worden teruggestuurd.

Voor retourzendingen kunt u ons RMA-aanvraagformulier en het ontsmettingscertificaat gebruiken.

U vindt de formulieren op onze homepage:

<https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>

17 SYMBOOL

De symbolen die in deze instructie en op het etiket worden gebruikt, hebben volgens DIN EN ISO 15223-1 de volgende betekenis:

Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Attentie!		Fabrikant
	Medisch hulpmiddel		Productiedatum
	Unsteril		Volg de gebruiksaanwijzingen
	Catalogusnummer		Bescherm tegen zonlicht
	Batchaanduiding		Bewaar op een droge plek
	Unieke productidentificatie		CE-markering

**18 PRODUCTLIJST**

Stand: 23-10-2024

300-1000	300-6020	301-2010	302-2040	305-0100	306-8000
300-1010	300-6030	301-2011	302-3000	305-0110*	306-9010
300-1020	300-6040	301-2020	302-4000	305-0130	306-9020
300-1030	300-6050	301-2021	302-5000	305-0200	307-1000
300-1040	300-6160	301-2030	302-8000	305-0220	307-1010
300-1050	300-6190	301-2040	302-9000	305-0260	307-1020
300-1060	300-7000	301-2041	302-9001	305-0300	307-6000
300-1070	300-8000	301-2050	302-9021	305-0400	307-8002
300-1110	300-8010	301-2060	302-9190	305-0500	307-8003
300-1120	300-8020	301-2070	303-0000	305-0830	308-0000
300-1130	300-8040	301-2080	303-0010	305-1200	308-3000
300-1160	300-8050	301-2090	303-0020	305-1300	308-3010
300-1170	300-9000	301-2100	303-0040	305-1410	308-4000
300-1180	301-0001	301-2200	303-1000	305-1420	308-4010
300-1330	301-0002	301-3050	303-2000	305-1600	308-5000
300-2000	301-0010	301-5000	303-3000	305-1610	309-0000
300-2010	301-0030	301-5011	303-3010	305-1710	309-1000
300-2020	301-0040	301-5020	303-3070	305-1720	309-2000
300-2030	301-0050	301-5030	303-3080	305-2000	309-2010
300-2050	301-0101	301-6000	303-3140	305-2010	309-2020
300-2070	301-0200	301-6010	303-3220	305-2100	309-2030
300-2120	301-0202*	301-6020	303-5000	305-2300	309-2040
300-2180	301-0210	301-6030	303-8000	305-2400	309-3000
300-2190	301-0300	301-6050	303-9010	305-2600	309-3020
300-2191	301-0320*	301-8000	303-9020	305-3000	309-4000
300-3000	301-0325	301-8160	304-0020	305-3001	309-4040
300-4010	301-0330	302-0000	304-3000	305-3100	309-4193
300-5010	301-0335	302-2001	304-4000	306-1000	309-4210
300-5130	301-0401	302-2010	304-9000	306-1010	309-4211
300-5190	301-1020	302-2020	305-0000	306-2000	309-4419
300-6010	301-2000	302-2030	305-0010	306-7010	309-6010