




## » ELECTROZI MIC MONOPOLARI «



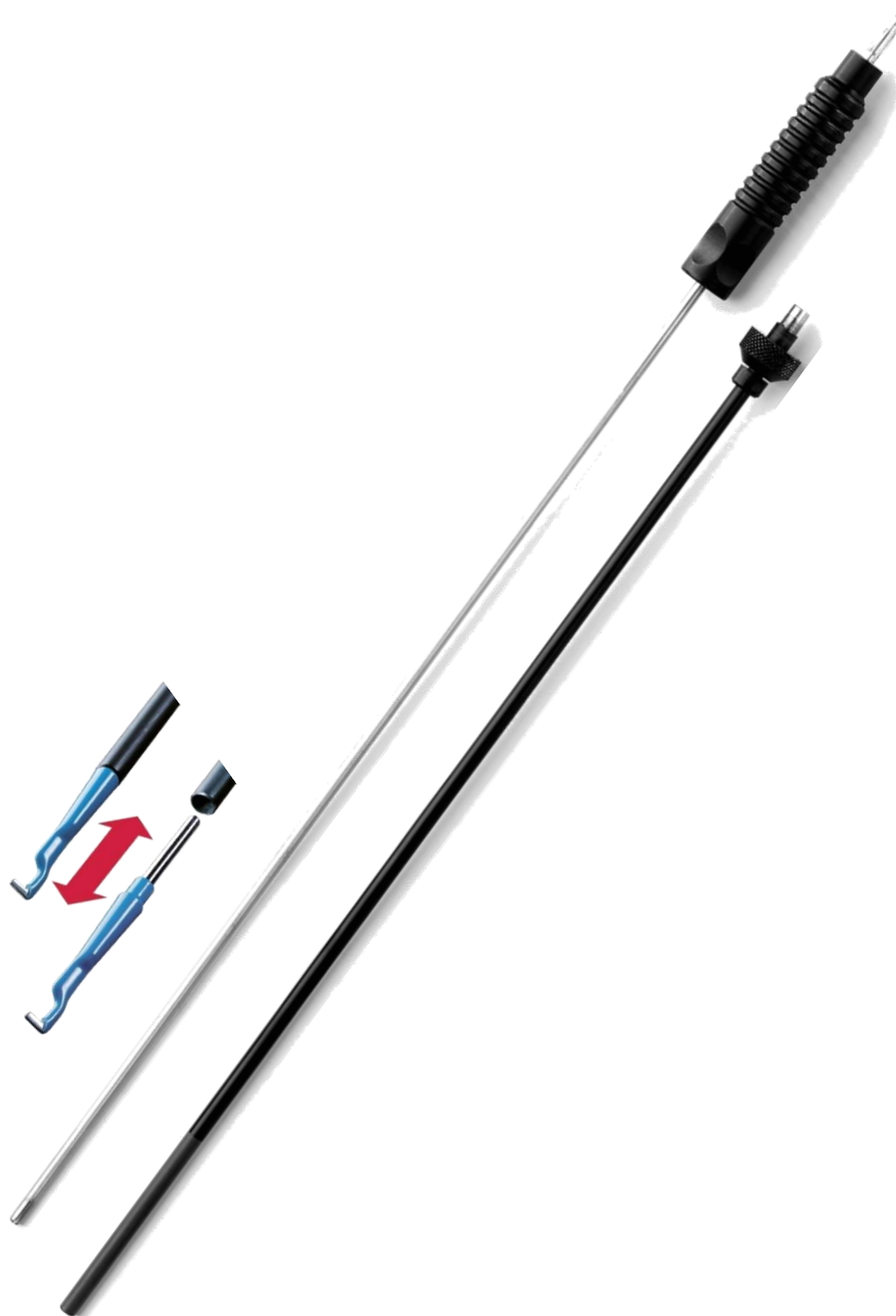

**Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH**

Sattlerstr. 11  
78532 Tuttlingen  
GERMANIA

SRN: DE-MF-000005822

Telefon: +49 7461 17 01 0

Mail: [mail@tekno-medical.com](mailto:mail@tekno-medical.com)

Web : [www.tekno-medical.com](http://www.tekno-medical.com)



|           |                                                         |          |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>DOMENIUL DE APLICARE .....</b>                       | <b>4</b> |
| <b>2</b>  | <b>VERIFICĂRI.....</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>3</b>  | <b>MANIPULARE.....</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>4</b>  | <b>SCOP.....</b>                                        | <b>4</b> |
| <b>5</b>  | <b>INDICAȚIE .....</b>                                  | <b>4</b> |
| <b>6</b>  | <b>CONTRAINDICAȚII.....</b>                             | <b>4</b> |
| <b>7</b>  | <b>POPULAȚIA DE PACIENȚI .....</b>                      | <b>5</b> |
| <b>8</b>  | <b>ELIMINAREA CA DEȘEU .....</b>                        | <b>5</b> |
| <b>9</b>  | <b>INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ȘI DE SIGURANȚĂ.....</b>    | <b>5</b> |
| 9.1       | INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SECURITATE .....               | 5        |
| 9.2       | INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU INSTRUMENTELE HF ..... | 5        |
| <b>10</b> | <b>COMBINAȚII.....</b>                                  | <b>6</b> |
| 10.1      | ÎN GENERAL .....                                        | 6        |
| 10.2      | LUNGIMEA ACCESORIILOR.....                              | 6        |
| <b>11</b> | <b>RETRATAREA.....</b>                                  | <b>6</b> |
| 11.1      | ÎN GENERAL .....                                        | 6        |
| 11.2      | PREGĂTIREA LA LOCUL DE UTILIZARE .....                  | 6        |
| 11.3      | TRANSPORT .....                                         | 6        |
| 11.4      | PREGĂTIREA PENTRU DECONTAMINARE .....                   | 6        |
| 11.5      | PRECURĂȚARE MANUALĂ .....                               | 7        |
| 11.6      | CURĂȚARE ÎN MAȘINI DE CURĂȚAT .....                     | 7        |
| 11.7      | DEZINFECȚIE ÎN APARATE (TERMICĂ).....                   | 7        |
| 11.8      | VERIFICAREA FUNCȚIONĂRII, ÎNTREȚINEREA GENERALĂ .....   | 7        |
| 11.9      | AMBALAJ .....                                           | 7        |
| 11.10     | STERILIZARE.....                                        | 7        |
| 11.11     | DEPOZITARE .....                                        | 8        |
| 11.12     | INFORMAȚII PRIVIND VALIDAREA TRATĂRII.....              | 8        |
| <b>12</b> | <b>INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE .....</b>                  | <b>8</b> |
| <b>13</b> | <b>RAPORTAREA PROBLEMELOR PRODUSULUI .....</b>          | <b>8</b> |
| <b>14</b> | <b>GARANȚIE .....</b>                                   | <b>8</b> |
| <b>15</b> | <b>SERVICE ȘI REPARAȚII .....</b>                       | <b>8</b> |
| <b>16</b> | <b>SIMBOLURI .....</b>                                  | <b>9</b> |
| <b>17</b> | <b>LISTA DE PRODUSE.....</b>                            | <b>9</b> |



## Instrucțiuni de utilizare – Rugăm a se citi înainte de utilizare 4 / 9



Pentru a menține riscurile pentru pacienți, utilizatori sau terți la un nivel cât mai scăzut posibil, instrucțiunile de utilizare trebuie urmate cu atenție. Utilizarea, pregătirea și testarea instrumentelor pot fi efectuate numai de specialiști instruiți. Înainte de a utiliza instrumentul electrochirurgical, citiți toate instrucțiunile de utilizare. Acest lucru se aplică și instrucțiunilor de utilizare a accesoriilor utilizate, inclusiv electrodul neutru și generatorul HF. Specificațiile, instrucțiunile de siguranță și avertismentele din instrucțiunile de utilizare respective trebuie respectate și respectate cu strictețe. Electrozii de la Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH (Tekno) și accesoriile acestora sunt livrate nesterile și trebuie să treacă prin ciclul complet de procesare (curățare, dezinfectare și sterilizare) înainte de prima și fiecare utilizare ulterioară.



### 1 DOMENIUL DE APLICARE



Aceste instrucțiuni de utilizare sunt valabile pentru electrozii monopolari MIC (în continuare „electrozi”) de la Tekno-Medical Optik-Chirurgie GmbH. (Consultați lista de articole din ultimul paragraf al acestor instrucțiuni de utilizare.)

### 2 VERIFICĂRI

Înainte de fiecare utilizare, electrozii trebuie inspectați pentru a depista eventuale rupturi, fisuri, deformări, deteriorări și funcționalitate. Trebuie acordată o atenție deosebită verificării unor zone precum izolația, conexiunile și capetele de lucru. Instrumentele uzate, corodate, deformate, poroase sau deteriorate în alt mod trebuie aruncate. Pe lângă eforturile producătorului în selectarea materialelor potrivite și asigurarea prelucrării atente a acestora, utilizatorul trebuie să asigure întreținerea și reprocesarea corespunzătoare și continuă a electrozilor.

### 3 MANIPULARE

Produsele pot fi utilizate în scopul prevăzut numai de către personal calificat și instruit corespunzător. Medicul curant sau utilizatorul este responsabil pentru selectarea instrumentelor pentru aplicații specifice sau utilizare chirurgicală, pentru asigurarea instruirii adecvate a personalului și pentru posedarea experienței în manipularea produselor. Acest produs poate fi utilizat în unități medicale numai de către profesioniști medicali instruiți.

Dacă este indicat, se poate utiliza un curent de coagulare monopolară țintit sau un curent de tăiere.

**Tensiunea maximă de ieșire a generatorului U<sub>max</sub>: 2000 Vp!**

**Atenție:** Instrumentele electrochirurgicale pot fi utilizate numai de către persoane special instruite în acest scop.

### 4 SCOP

Electrozii monopolari și electrozii cu microace sunt concepuți pentru pregătirea, coagularea și tăierea țesuturilor. Instrumentul este conectat la ieșirea monopolară a unui generator RF folosind un cablu monopolar adecvat.

### 5 INDICAȚIE

Instrumentele sunt destinate utilizării în chirurgia minim invazivă, în special laparoscopia.

### 6 CONTRAINDICAȚII

Instrumentul nu este destinat utilizării pe sistemele nervos central și circulator.

Utilizarea electrozilor RF este în general contraindicată atunci când este indicată utilizarea altor tehnici chirurgicale și în cazurile de afecțiuni care inhibă procesul de vindecare, de exemplu:

- Afectarea vascularizației,
- infecții acute și cronice, locale sau sistemice,
- infecții profunde și superficiale,
- afecțiuni musculare, nervoase sau vasculare severe,
- boli sistemice și disfuncții metabolice,
- Afecțiuni psihice care fac imposibilă participarea la programul de reabilitare (boala Parkinson, alcoolism, dependență de droguri etc.).

În plus, există contraindicații,

- în cazuri de inoperabilitate generală,
- în cazul lipsei de voință a pacientului,
- dacă cerințele tehnice nu sunt îndeplinite,
- la pacienții cu stimulatoare cardiace, defibrilatoare sau monitoare implantate,
- în situații de urgență acută,
- în cazurile de tulburări severe de coagulare,
  - în cazuri de afectare severă a plămânilor sau a sistemului cardiovascular.



## 7 POPULAȚIA DE PACIENȚI

În afară de utilizările contraindicate enumerate în aceste instrucțiuni de utilizare, nu există restricții în ceea ce privește populația de pacienți.

## 8 ELIMINAREA CA DEȘEU

În cazul în care instrumentele nu mai pot fi reparate și reprocesate, acestea trebuie eliminate în conformitate cu reglementările și legile specifice fiecărei țări.

## 9 INSTRUCȚIUNI DE APLICARE ȘI DE SIGURANȚĂ



Nerespectarea acestor instrucțiuni de aplicare și de siguranță poate duce la vătămări, defecțiuni sau alte incidente neașteptate.

### 9.1 Instrucțiuni generale de securitate

- Nu prindeți capătul distal.
- Nu utilizați și nu reparați instrumentele deteriorate.
- Nu atingeți marginile și vârfurile ascuțite.
- Nu îndoiți capătul distal.
- Perforarea țesutului din cauza utilizării unui manșon de trocar cu un diametru prea mare. Utilizați numai manșoane de trocar cu un diametru ușor mai mare decât cel al instrumentului.
- Toate tipurile de instrumente reutilizabile trebuie să fie complet curățate, dezinfectate și sterilizate înainte de a fi utilizate pentru prima dată și înainte de fiecare utilizare ulterioară.
- Înainte de fiecare utilizare, instrumentul trebuie să fie verificat pentru a se verifica dacă funcționează corect și dacă prezintă deteriorări și uzură vizibile, de exemplu fisuri sau rupturi.
- Ambalajul de transport este nepotrivit pentru temperaturile ridicate din timpul autoclavării și trebuie aruncat înainte de prima sterilizare.
- Nu supraîncărcați instrumentele. Supraîncărcarea datorată unei forțe excesive poate duce la ruperea, îndoirea și funcționarea defectuoasă a dispozitivului medical și la rănirea pacientului sau a utilizatorului. Nu îndoiți instrumentele îndoite înapoi în poziția inițială, risc de rupere.
- Nu utilizați un produs deteriorat sau defect. Sortați și etichetați imediat produsul deteriorat și excludeți utilizarea ulterioară.

### 9.2 Instrucțiuni de siguranță pentru instrumentele HF

- Risc de arsuri datorate curentului HF
- Instrumentul poate fi utilizat numai de personal calificat, cu pregătire medicală și tehnică.
- În cazul pacienților cu stimulatoare cardiace, verificați compatibilitatea acestora cu radiațiile HF.
- Nu utilizați substanțe explozive/inflamabile în timpul funcționării.
- Nu așezați instrumentul pe pacient.
- Evitați carbonizarea țesuturilor!
- Puterea generatorului HF trebuie să fie întotdeauna setată cât mai jos posibil pentru a obține doar efectul dorit.
- Nu utilizați instrumentul pentru coagularea prin pulverizare.
- Poziționați întotdeauna cablurile pacientului (electrod activ, electrod neutru) astfel încât să nu existe niciun contact cu pacientul sau cu alte cabluri.
- Instrumentele care nu sunt utilizate temporar trebuie să fie întotdeauna izolate de pacient pentru a evita rănirea acestuia în cazul activării accidentale a curentului HF.
- Verificați posibila utilizare a aplicațiilor bipolare în cazul în care există riscul ca curentul HF să treacă prin zone de secțiune transversală relativ mici ale corpului pacientului (evitați deteriorarea neintenționată a țesuturilor).
- Activați curentul HF numai dacă suprafețele de contact se află în raza vizuală și au un contact bun cu țesutul care urmează să fie tratat. Nu atingeți niciun alt instrument metalic, manșoane de trocar, optice, cabluri sau altele similare.
- În timpul funcționării electrodului se poate utiliza numai aspirația.
- Îndepărtați orice reziduuri de dezinfectant de pe corpul pacientului.
- Utilizați un electrod neutru adecvat.
- Poziționați electrodul neutru astfel încât pacientul să fie în contact cu întreaga suprafață a electrodului neutru.
- Risc de arsuri din cauza încălzirii excesive a electrodului neutru!
- Utilizați instrumentul numai dacă izolația nu este deteriorată.
- Atingeți zonele izolate numai cu degetele, nu și pinul de contact.
- Reglați tensiunea generatorului HF la viteza de tăiere pentru a susține hemostaza primară.



### Verificați întotdeauna electrozii și mânerele pentru:

- metalul vizibil expus al arborelui electrodului activ în punctul de conectare la mânerul activ,
- o conexiune electrică slabă între mânerul activ și arborele electrodului activ,
- o potrivire necorespunzătoare între mânerul activ și arborele electrodului activ.
- Pentru conectarea și deconectarea cablului, țineți întotdeauna numai de fișă, nu trageți niciodată de cablu. Utilizarea cablurilor deteriorate poate duce la un pericol considerabil. Verificați dacă cablul prezintă deteriorări vizibile înainte de fiecare utilizare.

## 10 COMBINAȚII

### 10.1 În general

Electrozii sunt concepuți pentru conectarea la generatoare RF folosind cabluri adecvate. Prindeți întotdeauna cablul de conector atunci când îl conectați și îl deconectați; nu trageți niciodată de cablu. Utilizarea cablurilor deteriorate poate prezenta pericole semnificative. Verificați cablul pentru a depista eventuale deteriorări vizibile înainte de fiecare utilizare.

#### **Cablurile RF deteriorate nu trebuie utilizate!**

 Combinarea incorectă a produselor poate duce la vătămări corporale ale pacientului, utilizatorului sau terților, sau la deteriorarea produselor! Instrucțiunile de utilizare și de siguranță ale producătorului generatorului trebuie respectate! Instrumentul se introduce printr-o manșă de trocar de 5,5 mm.

Verificați întotdeauna mânerele pentru:

- 
- Metal vizibil expus la punctul de conectare al cablului RF,
  - conexiune electrică slabă între mâner și cablul RF,
  - Potrivire necorespunzătoare între mâner și cablul RF.

### 10.2 Lungimea accesoriilor

**Notă** ( conform DIN EN IEC 60601-2-2, subsecțiunea 202.7.9.2.14 k):

**Lungimea cablurilor de conectare, care acționează ca antene, este între 3 și 5 metri.**

**Lungimea de lucru a electrozilor este de 350 - 450 mm.**

## 11 RETRATAREA

### 11.1 În general

În general, instrumentele chirurgicale pot fi reprelucrate numai de către persoane care dispun de expertiza necesară pentru activitățile prevăzute. Informații detaliate privind reprelucrarea instrumentelor pot fi găsite în "Broșura roșie" a AKI. Link-uri către legi, standarde și comitete specializate în reprelucrare pot fi găsite, de asemenea, la [www.a-k-i.org](http://www.a-k-i.org). Din cauza designului produsului și a materialelor utilizate, nu se poate stabili o limită definită a aplicațiilor maxime fezabile. Durata de viață a dispozitivelor medicale este determinată de funcția acestora și de manipularea delicată. Reprocesarea frecventă are un efect redus asupra produsului. Sfârșitul duratei de viață a produsului este determinat, în mod normal, de uzura și de deteriorările cauzate de utilizare. Siguranța biologică după 200 de cicluri de reprocesare a fost demonstrată; o acumulare de agenți de curățare sau alte substanțe nocive poate fi exclusă în procedurile de reprocesare descrise în aceste instrucțiuni.

### 11.2 Pregătirea la locul de utilizare

Îndepărtați murdăria grosieră de pe instrumente imediat după utilizare. Nu folosiți agenți de fixare sau apă fierbinte (>40°C), deoarece acest lucru duce la fixarea reziduurilor și poate influența negativ succesul curățării.

### 11.3 Transport

Depozitarea în siguranță într-un container închis și transportul instrumentelor la locul de reprelucrare pentru a evita deteriorarea instrumentelor și contaminarea mediului.

### 11.4 Pregătirea pentru decontaminare

Dacă este posibil, instrumentele trebuie să fie dezasamblate, respectiv deschise pentru tratare (a se vedea instrucțiunile specifice produsului). Instrumentele trebuie să fie depozitate într-un mod care să permită spălarea pe suporturi de instrumente care sunt adecvate pentru mașini. Conformația suporturilor pentru instrumente nu trebuie să afecteze curățarea și dezinfecția ulterioară din cauza umbrelor acustice sau de spălare.



## 11.5 Precurățare manuală

Puneți instrumentele în apă rece complet demineralizată timp de cel puțin 5 minute. Dacă este posibil, dezasamblați instrumentele și curățați-le sub apă rece cu o perie moale, până când nu mai sunt vizibile reziduuri. Curățați sub presiune cavitățile, alezajele și filetele timp de cel puțin 10 secunde cu un pistol cu apă (metodă pulsatorie, presiune minimă 2 bar). Plasați instrumentele într-o baie cu ultrasunete la 40°C cu 0,5% soluție alcalină sau enzimatică de curățare timp de 15 minute și sonicați-le. Îndepărtați instrumentele și clătiți-le cu apă rece.

Soluția de curățare trebuie schimbată cel puțin o dată pe zi, mai des dacă este necesar. Un grad prea ridicat de murdărie afectează efectul de curățare și crește riscul de coroziune. Se vor respecta legile și directivele naționale.

## 11.6 Curățare în mașini de curățat

| Pasul                     | Parametru                               |                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Spălare prealabilă</b> | Temperatura de spălare + Calitatea apei | Apă rece din rețea                        |
|                           | Timp de acțiune                         | 60 s                                      |
| <b>Spălare prealabilă</b> | Temperatura de spălare + Calitatea apei | Apă rece din rețea                        |
|                           | Timp de acțiune                         | 180 s                                     |
| <b>Curățare</b>           | Temperatură de curățare                 | 45°C                                      |
|                           | Calitatea apei                          | Apă din rețea                             |
|                           | Timp de acțiune                         | 300 s (worst case condition) / RKI: 600 s |
|                           | Agent de curățare                       | Neodisher Medizym                         |
|                           | Concentrație                            | 0,50 %                                    |
| <b>Neutralizare</b>       | Temperatura de spălare                  | 40°C                                      |
|                           | Calitatea apei                          | Apă din rețea                             |
|                           | Timp de acțiune                         | 180 s                                     |
|                           | Agent de neutralizare                   | Neodisher Z                               |
|                           | Concentrație                            | 0,10 %                                    |
| <b>Post-spălare</b>       | Temperatura de spălare                  | 40 C                                      |
|                           | Calitatea apei                          | Apă complet demineralizată                |
|                           | Timp de acțiune                         | 120 s                                     |

## 11.7 Dezinfecție în aparate (termică)

| Pasul                      | Parametru                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Dezinfecție termică</b> | Temperatură de dezinfecție                                                                                                                                                                                                                                                        | 90°C (A <sub>0</sub> 3000) |
|                            | Calitatea apei                                                                                                                                                                                                                                                                    | Apă complet demineralizată |
|                            | Timp de acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 s                      |
| <b>Uscare</b>              | Uscarea părții exterioare a instrumentelor prin ciclul de uscare al mașinii de curățat / dezinfecat. Dacă este necesar, se poate realiza o uscare manuală suplimentară folosind o cârpă care nu lasă scame. Uscați cavitățile și canalele instrumentelor cu aer comprimat steril. |                            |

## 11.8 Verificarea funcționării, întreținerea generală

Produsele trebuie să fie macroscopic curate după fiecare curățare, adică fără murdărie vizibilă. Produsele pătate trebuie să fie sortate imediat și supuse unui tratament special. Toate părțile mobile trebuie inspectate cu o atenție deosebită.

În cazul în care apar defecțiuni sau deteriorări, produsele trebuie să fie sortate imediat.

Testarea funcțională și întreținerea instrumentelor trebuie să fie efectuate extrem de minuțios. O procedură de întreținere adecvată crește durata de viață a instrumentelor.

## 11.9 Ambalaj

Selectați ambalarea conformă cu standardele a instrumentelor pentru sterilizare în conformitate cu DIN EN ISO 11607-1, DIN EN 868-2 și DIN EN 868.

## 11.10 Sterilizare

Sterilizarea produselor prin procesul de vid preliminar fracționat (în conformitate cu DIN EN ISO 17665), ținând seama de cerințele naționale respective.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Vid preliminar:</b>             | De 3 ori |
| <b>Temperatură de sterilizare:</b> | 134 °C   |
| <b>Timp de sterilizare:</b>        | 5 min    |
| <b>Timp de uscare:</b>             | 20 min.  |

Folosirea oricărei alte metode de sterilizare este în afara responsabilității noastre!



## 11.11 Depozitare



Instrumentele sterilizate trebuie depozitate într-un ambalaj adecvat, într-un mediu uscat, curat și lipsit de praf, la temperaturi moderate cuprinse între +5°C și +40°C și umiditate constantă a aerului. Nu le depozitați împreună cu substanțe chimice. Distanța dintre podea și raft trebuie să fie de cel puțin 30cm. Durata depozitării se stabilește de către utilizator.

## 11.12 Informații privind validarea tratării

La validarea tratării cu aparate, au fost utilizate următoarele materiale și mașini:

|                                       |                               |                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agent de curățare:</b>             | Neodisher Medizym 0,5 % (v/v) | Pentru detalii, a se vedea rapoartele de încercare:<br>23277 / 23278 / 23279<br>CleanControlling Medical GmbH & Co. KG |
| <b>Neutralizator:</b>                 | Neodisher Z 0,1 % (v/v)       |                                                                                                                        |
| <b>Mașină de curățat-dezinfectat:</b> | Miele PG 8535                 |                                                                                                                        |
| <b>Autoclavă cu aburi:</b>            | Lautenschläger ZentraCert     |                                                                                                                        |

## 12 INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE

Dacă substanțele chimice și mașinile descrise mai sus nu sunt disponibile, este responsabilitatea utilizatorului să-și valideze procesul în consecință. Este de datoria utilizatorului să se asigure că procesul de reprocesare, inclusiv resursele, materialele și personalul, este adecvat pentru a obține rezultatele cerute. Stadiul tehnicii și legile naționale impun ca procesele validate să fie urmate. În timpul reprocesării, temperatura care acționează asupra instrumentului nu trebuie să depășească **140°C**. În principiu, curățarea și dezinfecția mecanică sunt întotdeauna de preferat curățării manuale. Cu curățarea și dezinfecția mecanică, există o siguranță mai mare în proces.

Nu folosiți niciodată perii metalice, bureți metalici sau agenți de curățare abrazivi pentru curățarea manuală/pre-curățare.

Agenții de curățare puternic alcalini deteriorează materialele plastice și acoperirile anodizate.

Instrumentele nu trebuie sterilizate în sterilizatoare cu aer cald. Nu utilizați agenți de curățare caustici. Nu utilizați agenți de curățare oxidanți puternici. Agenții cu o valoare a pH-ului neutră (7,0) sunt cei mai potriviți.

## 13 RAPORTAREA PROBLEMELOR PRODUSULUI



În conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale și cu sistemul nostru de management al calității, toate problemele produsului trebuie raportate producătorului.

În timpul programului de lucru ne puteți contacta telefonic la +49 (0) 07461 / 1701-0.

În afara orelor normale de program, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa [safety@tekno-medical.com](mailto:safety@tekno-medical.com).

Incidentele grave trebuie, de asemenea, raportate autorității locale responsabile de locația lor.

## 14 GARANȚIE

Produsele sunt fabricate din materiale de înaltă calitate și sunt supuse controlului calității înainte de livrare. În cazul în care apar defecte, vă rugăm să contactați departamentul nostru de service. Tekno-Medical nu poate garanta că produsele sunt potrivite pentru nicio procedură specifică. Tekno-Medical nu își asumă nicio răspundere pentru daune accidentale sau indirecte. Tekno-Medical nu își asumă nicio răspundere dacă aceste instrucțiuni de utilizare au fost încălcate în mod demonstrabil.



**Atenție :** În cazul utilizării instrumentelor la pacienți cu boala Creutzfeldt-Jakob sau variantele acesteia (vCJD, ESB, EST), Tekno-Medical declină orice responsabilitate pentru reutilizare.

## 15 SERVICE ȘI REPARAȚII



Nu încercați să efectuați singur nicio reparație sau modificare a produsului. Aceste lucrări trebuie efectuate numai de către Tekno-Medical sau personal autorizat de Tekno-Medical.

Produsele defecte trebuie să treacă prin întreaga procedură de reprocesare înainte de a fi returnate pentru reparare. Vă rugăm să utilizați formularul nostru de cerere RMA și certificatul de decontaminare pentru returnări.

Formulare disponibile la: <https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>



# Instrucțiuni de utilizare – Rugăm a se citi înainte de utilizare 9 / 9

## 16 SIMBOLURI

Simbolurile utilizate în aceste instrucțiuni și pe etichetă au următoarea semnificație în conformitate cu DIN EN ISO 15223-1:

|  |                                                                                                                                           |  |                                    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|
|  | Atenție!                                                                                                                                  |  | Producător                         |
|  | Dispozitiv medical                                                                                                                        |  | Data de fabricație                 |
|  | Non-steril                                                                                                                                |  | Urmați instrucțiunile de utilizare |
|  | Număr de catalog                                                                                                                          |  | Protejați de lumina soarelui       |
|  | Numele lotului                                                                                                                            |  | Denumirea lotului                  |
|  | Identificarea clară a produsului                                                                                                          |  |                                    |
|  | Marcajul CE cu numărul organismului notificat:<br><b>mdc – medical device certification GmbH</b><br>Kriegerstrasse 6, D – 70191 Stuttgart |  |                                    |

**REF**

## 17 LISTA DE PRODUSE

Tipărit la: 28.11.2023

|             |         |         |         |             |
|-------------|---------|---------|---------|-------------|
| 706-170     | 706-172 | 706-175 | 706-192 | 706-195     |
| 706-170-45* | 706-173 | 706-176 | 706-193 | 706-196     |
| 706-171     | 706-174 | 706-191 | 706-194 | Z0000128723 |